

Одномоментная имплантация и немедленная нагрузка полностью по цифровому протоколу

Джакомо Фаббри
Италия



Джакомо Фаббри (Giacomo Fabbri)

Описание

Установка имплантата NobelActive® с поверхностью TiUltra™ и основания On1™ с поверхностью Heal™ — результат через 18 месяцев наблюдения

Пациент

Женщина, 41 год

Клиническая ситуация

Неудовлетворительный результат эндодонтического лечения второго премоляра верхней челюсти

Хирургический протокол

Одновременная установка имплантата NobelActive® с поверхностью TiUltra™ в лунку удаленного зуба, небольшой объем костной пластики с использованием материала creos™ xenogain, фиксация основания On1™ с поверхностью Heal™

Ортопедическое решение

Временный абатмент On1™, временная коронка TempShell

Дата операции

Февраль 2019 г.


Общий срок лечения

3 месяца (постоянная коронка установлена в мае 2019 г.)

Позиция зуба

15

Одновременная установка имплантата NobelActive® TiUltra™ сразу после удаления корня зуба, фиксация основания On1™ Base Heal™ и установка временной конструкции полностью по цифровому протоколу с благоприятными ранними результатами в отношении твердых и мягких тканей.

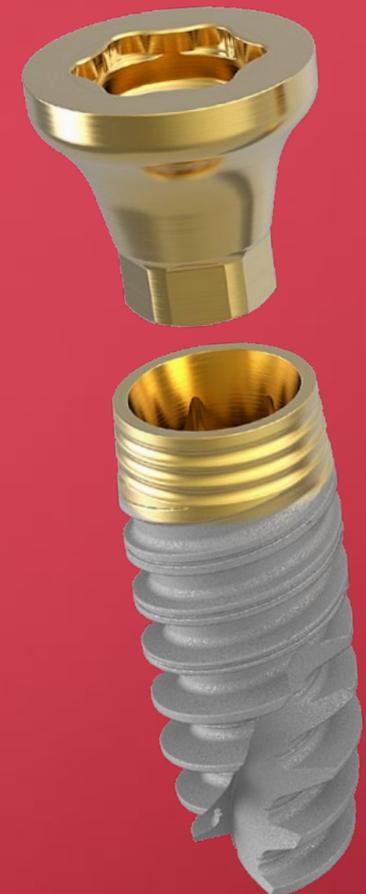

**Исходная клини-
ческая ситуация**

**Планирование
лечения**

**Хирургический
протокол**

**Ортопедиче-
ский протокол**

Результат

Клинический случай: д-р Джакомо Фаббри (Giacomo Fabbri)

Улыбка до операции


Исходная клиническая ситуация

Планирование лечения


Хирургический протокол

Ортопедический протокол

Результат

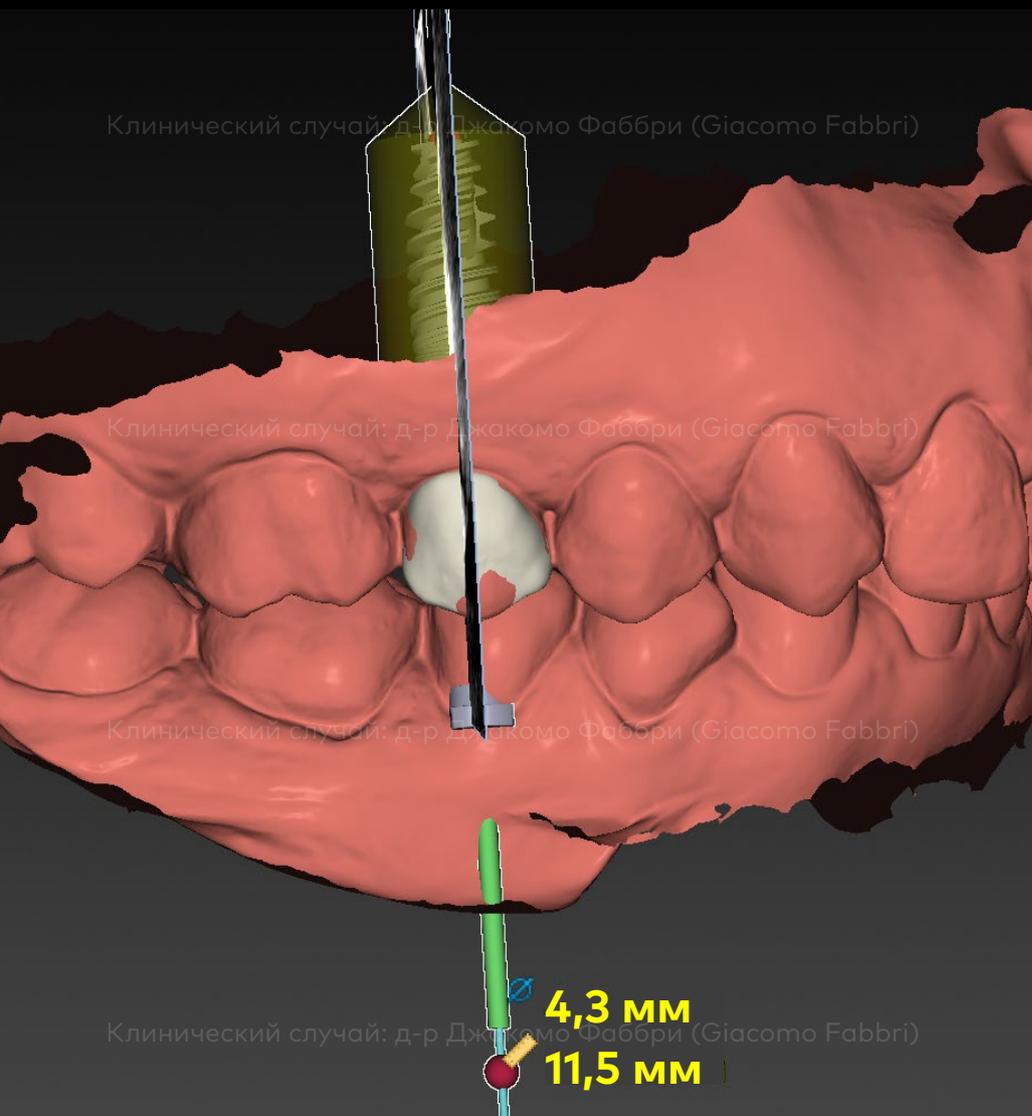

Планирование лечения в программном обеспечении DTX Studio™ Implant

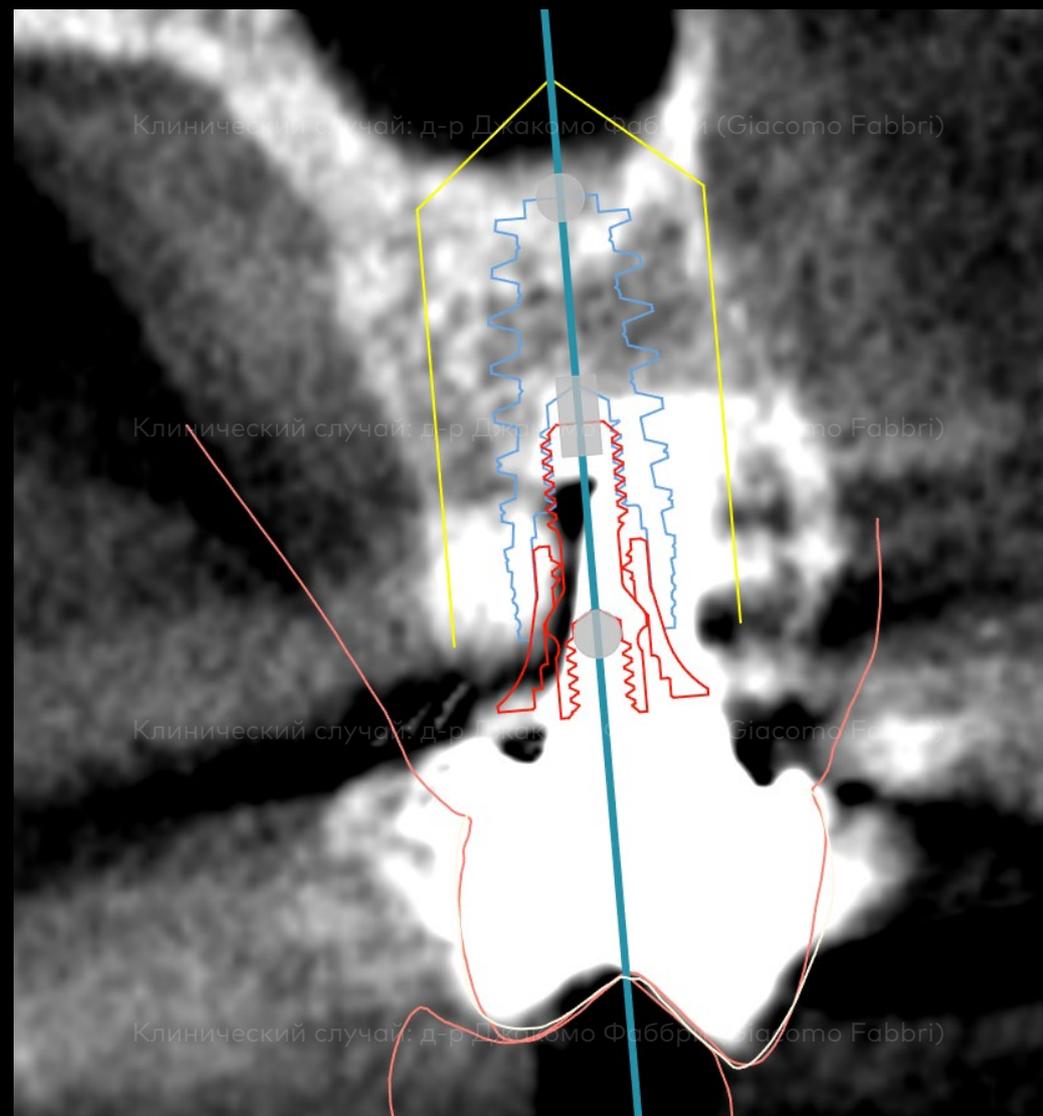

Планирование лечения в программном обеспечении DTX Studio™ Implant — позиционирование имплантата и абатмента

**Исходная клини-
ческая ситуация**

**Планирование
лечения**


**Хирургический
протокол**

**Ортопедиче-
ский протокол**

Результат



Клиническая ситуация после удаления корня зуба

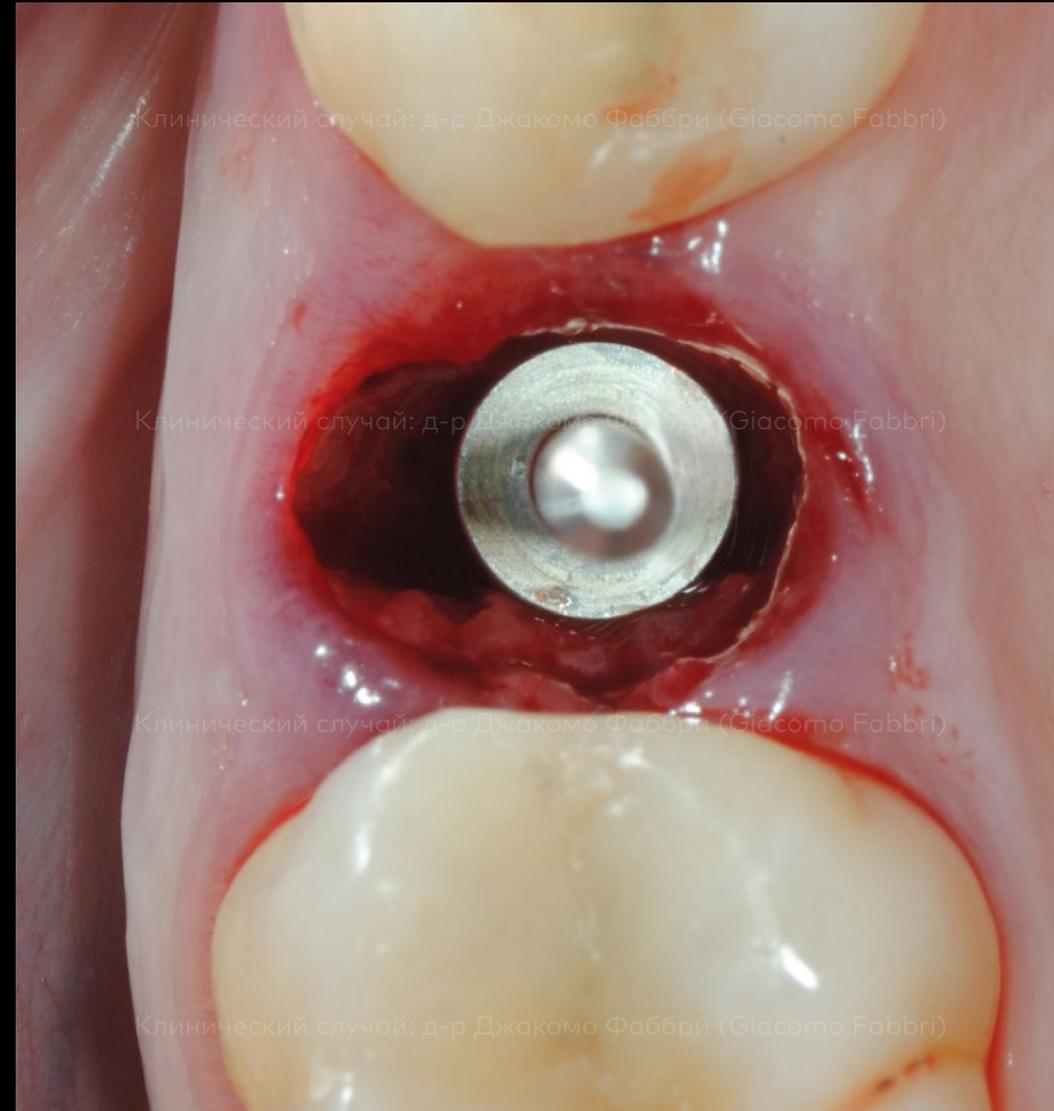

Окклюзионный вид: пин, установленный в остеотомическое отверстие

Исходная клиническая ситуация

Планирование лечения


Хирургический протокол

Ортопедический протокол

Результат



Установка имплантата NobelActive® с поверхностью TiUltra™ в лунку сразу после удаления зуба

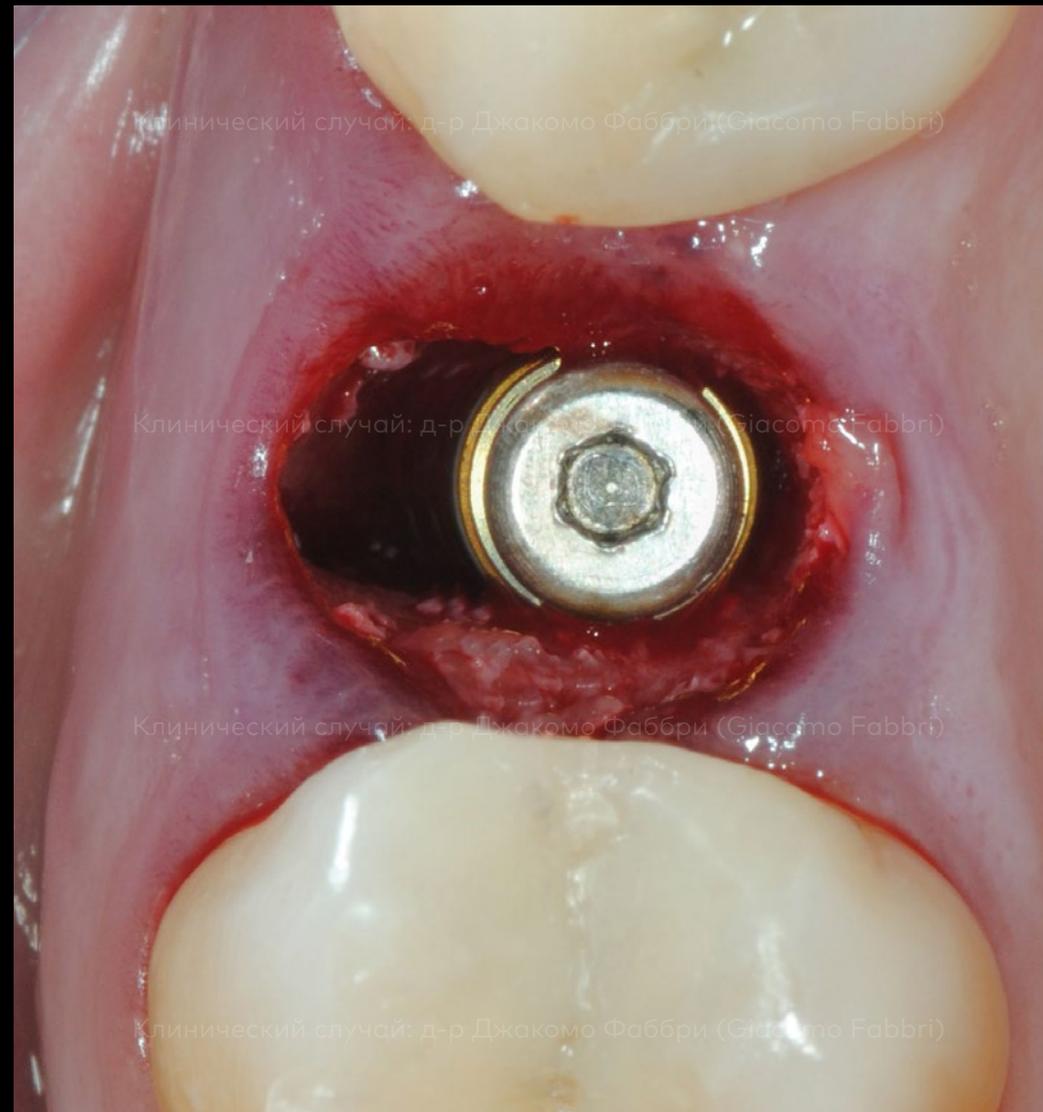

Окклюзионный вид: имплантат с заживляющим колпачком


Исходная клиническая ситуация

Планирование лечения


Хирургический протокол

Ортопедический протокол

Результат

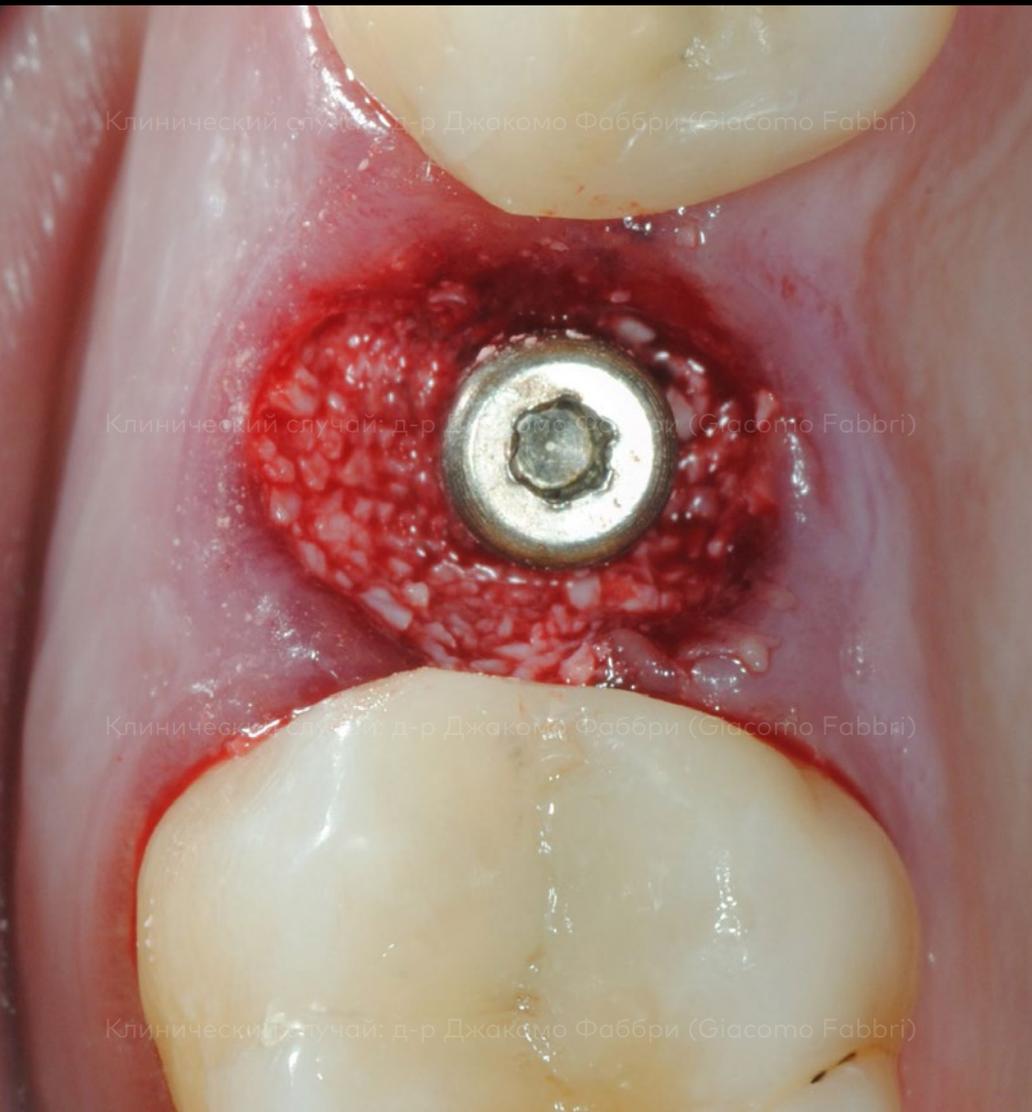

Окклюзионный вид: костная пластика материалом creos™ xenogain

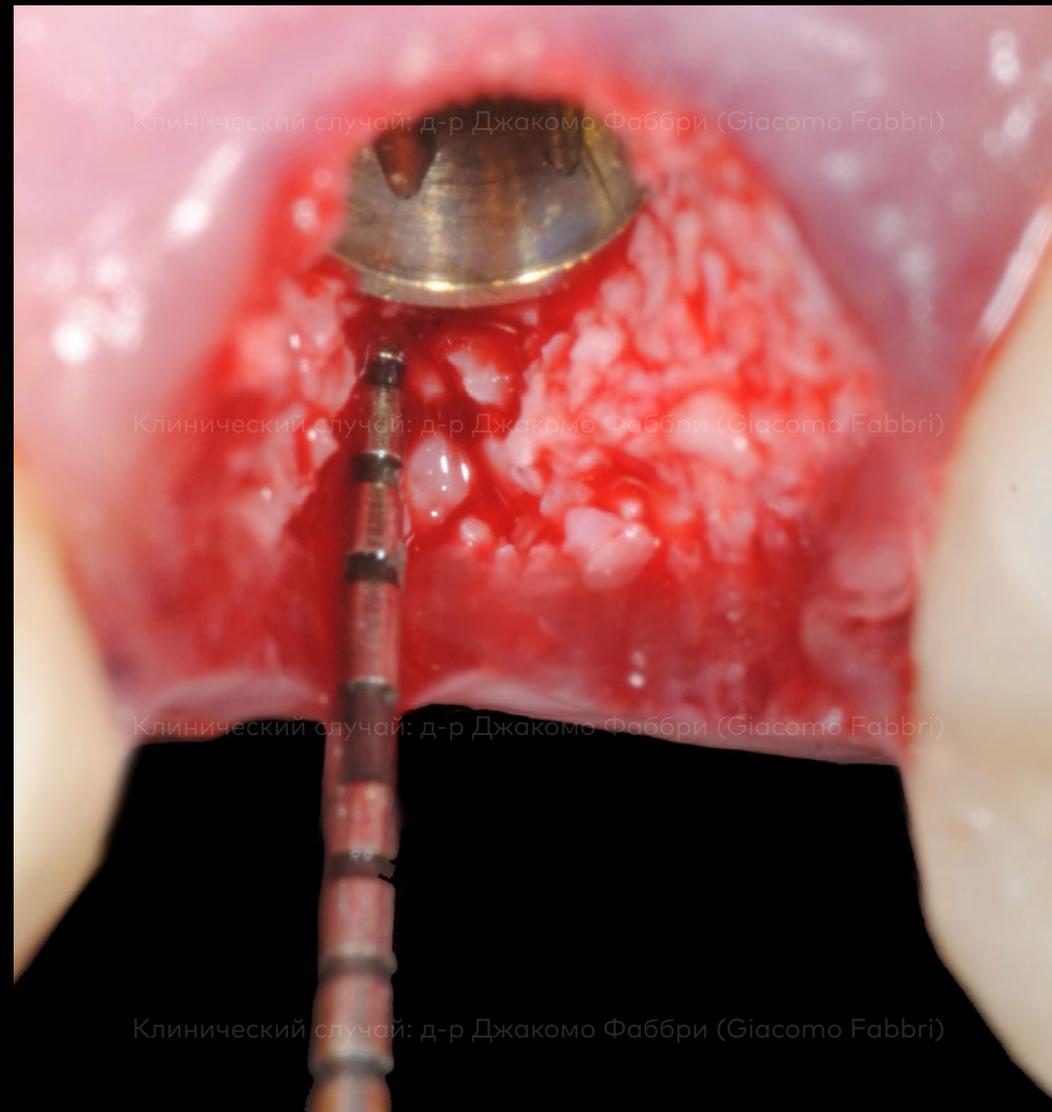

Измерение расстояния от имплантата до свободного десневого края с помощью пародонтологического зонда

Исходная клиническая ситуация

Планирование лечения


Хирургический протокол

Ортопедический протокол

Результат



Латеральный вид: постоянная коронка через 3 месяца после установки имплантата

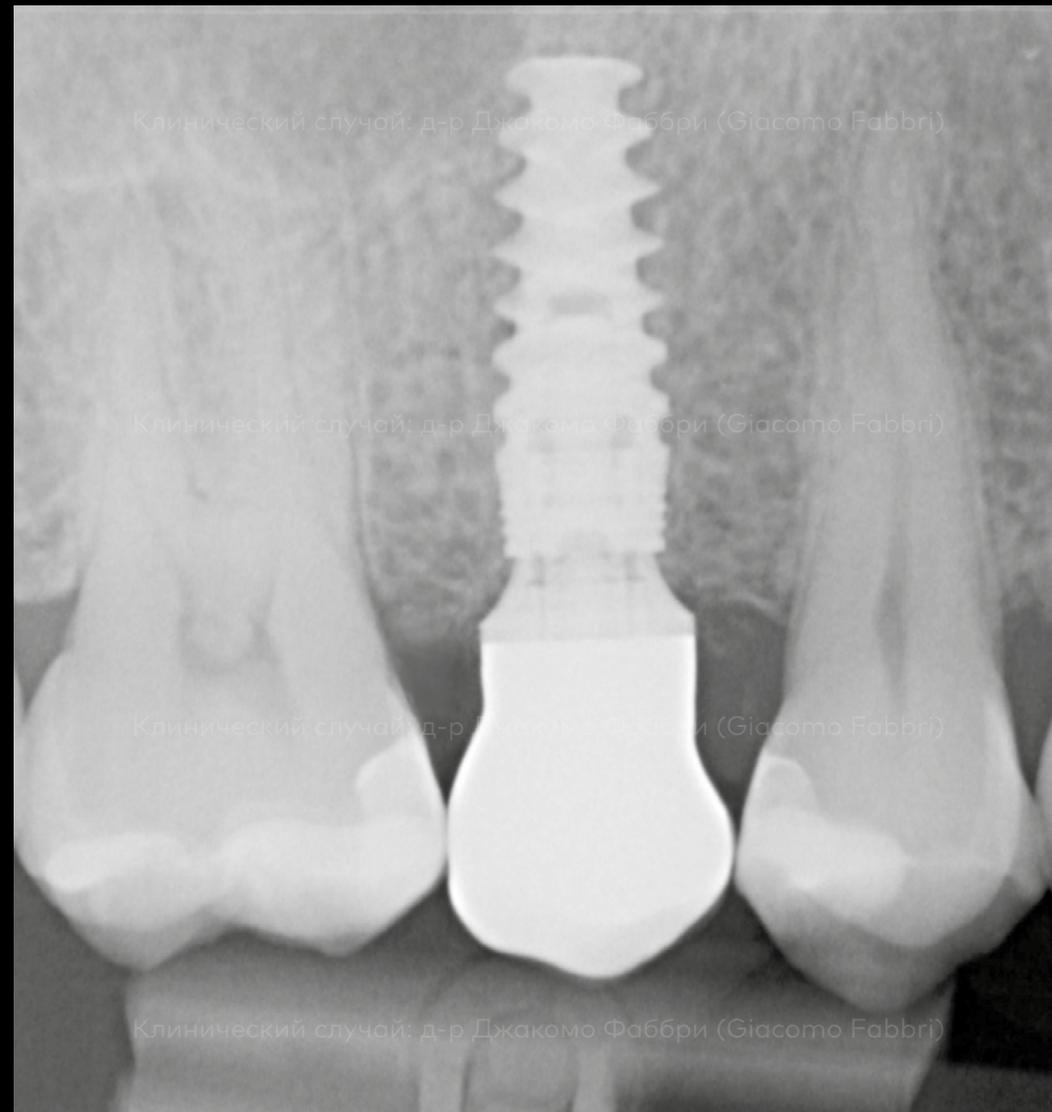

Рентгенограмма имплантата с постоянной конструкцией через 3 месяца после установки

Исходная клини-
ческая ситуация

Планирование
лечения

Хирургический
протокол

Ортопедиче-
ский протокол

Результат

Клинический случай: д-р Джакомо Фаббри (Giacomo Fabbri)

Улыбка пациентки с постоянной коронкой через 3 месяца после имплантации


**Исходная клини-
ческая ситуация**

**Планирование
лечения**

**Хирургический
протокол**

**Ортопедиче-
ский протокол**

Результат

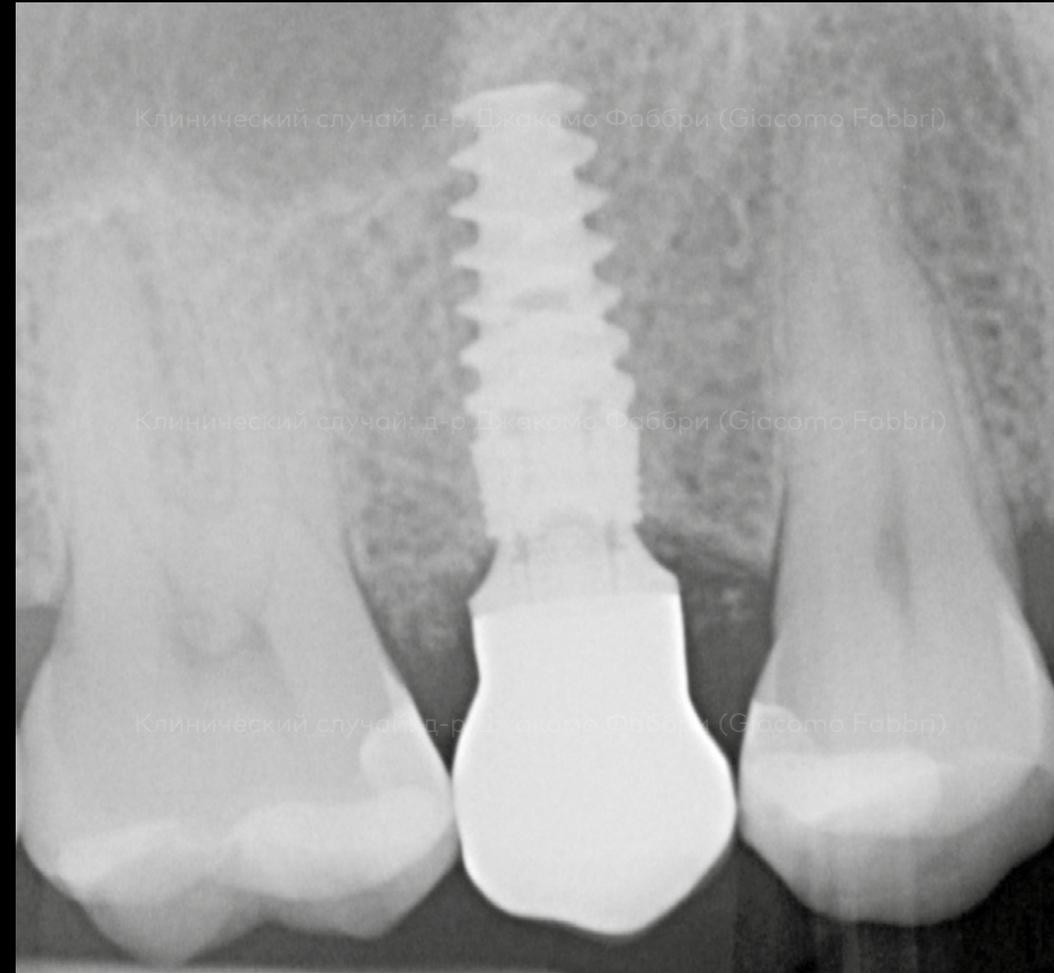

Латеральный вид: через 18 месяцев после установки имплантата

Имплантат на рентгенограмме через 18 месяцев после операции

Исходная клиническая ситуация

Планирование лечения

Хирургический протокол

Ортопедический протокол

Результат



Вид в полости рта через 18 месяцев после установки имплантата

Вид с окклюзионной стороны через 18 месяцев после операции

Клинический случай: Джакомо Фаббри (Giacomo Fabbri)



GMT 75697 RU 2106 © Nobel Biocare Services AG, 2020. Все права защищены. Дистрибьютор материала creos xenogain: Nobel Biocare. Официальный производитель: Nibec Co., Ltd. Iwol electricity-electronic Agro-industrial Complex, 116 Bamdi-gil, Iwol-myeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, 27816 Korea. KaVo является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой компании Kaltenbach & Voigt GmbH. DTX Studio, Nobel Biocare, логотип Nobel Biocare и все остальные товарные знаки являются товарными знаками компании Nobel Biocare, если иное не указано явно или не следует очевидно из контекста. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте nobelbiocare.com/trademarks. Другие торговые марки — зарегистрированные или незарегистрированные — являются торговыми марками соответствующих владельцев. Изображения приведены без учета масштаба. Обратите внимание: часть продукции может быть разрешена к применению или представлена для продажи не во всех странах. Для получения информации о текущем ассортименте продукции и ее наличии обратитесь в представительство Nobel Biocare. Применять только по назначению врача. Изображения продукции приведены исключительно в целях иллюстрации и могут не точно соответствовать реальной продукции. Внимание! В соответствии с федеральным законодательством США или законодательством вашей страны продажа данного компонента разрешена только стоматологам и врачам или по их заказу. Указания о применении продукции, в том числе показания, противопоказания, предупреждения и предостережения, см. в инструкции по применению. Компания Nobel Biocare не несет ответственности за травмы или ущерб, нанесенные любому лицу или имуществу как следствие использования информации об этом клиническом случае. Целью этого клинического случая не является рекомендация каких-либо мер, методик, протоколов или продукции, а также он не заменяет медицинское образование или ваше собственное клиническое суждение как медицинского специалиста. Зрители ни в коем случае не должны пренебрегать профессиональными медицинскими рекомендациями или откладывать обращение за медицинской помощью на основании какой-либо информации, представленной в этом клиническом случае. Протокол работы показан не полностью. Часть кадров была удалена.