


# PureSet™

ピュアセット

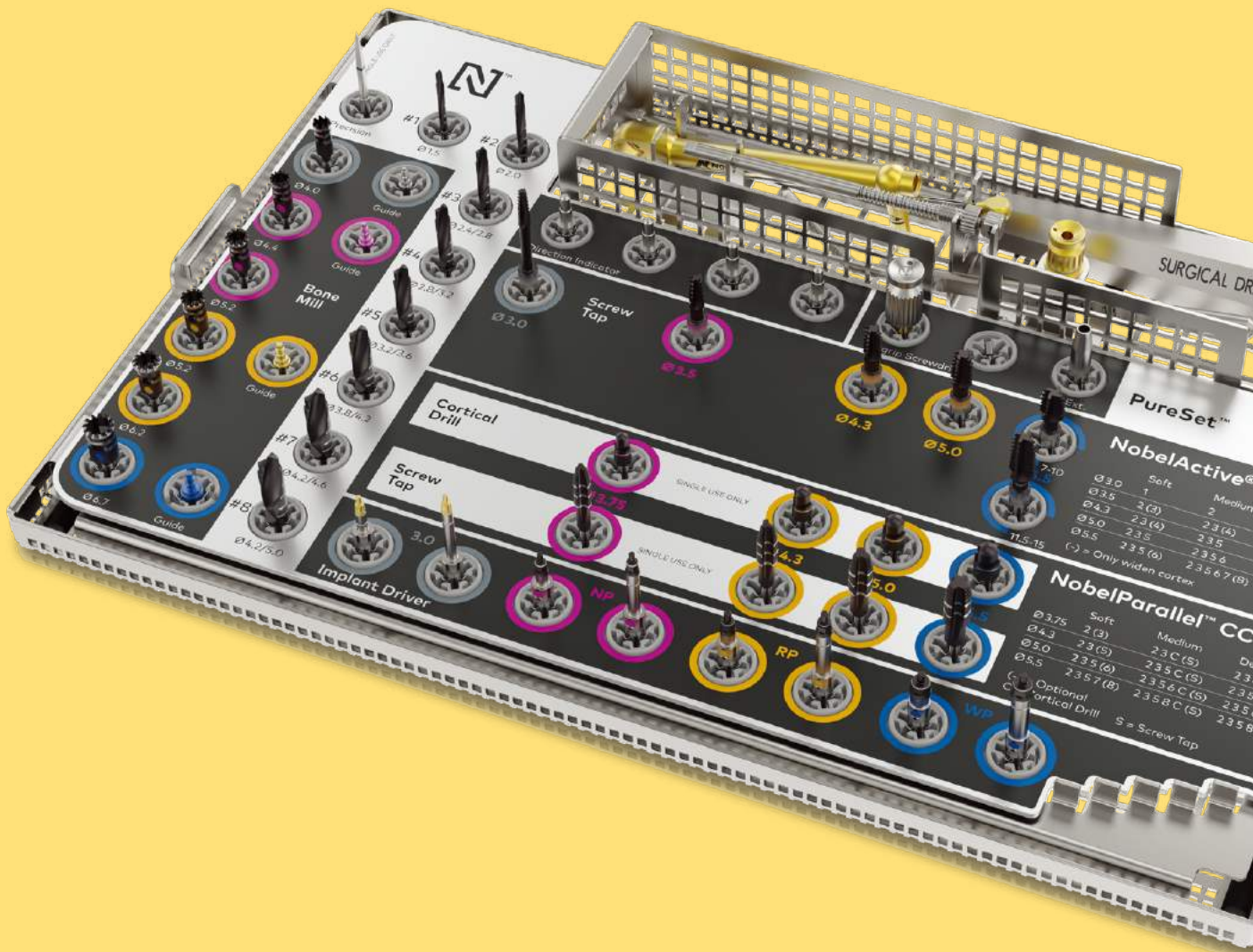

WE FOLLOW NO ONE.


# ウォッシャー・ディスインフェクター（自動洗浄器）対応の デザイン設計

**ピュアセット** は、ウォッシャー・ディスインフェクター（自動洗浄器）に対応しており、強度の高いステンレス・スチール製のため、衛生的かつ効率的にご利用いただけます。日々の洗浄・滅菌処理に伴う煩雑な手順を簡便にし、安心・安全な診療を患者様に提供します。



## 追及された衛生管理

ステンレススチール製のピュアセットトレーは、手作業を減らす自動洗浄可能なデザイン<sup>1</sup>

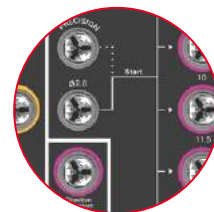

## シンプルで直感的なレイアウト

手術フローを考慮したレイアウトと、パーツの識別を簡便化するデザインで作業効率をアップ



## 機能性の高い保持機構

安定してドリルを保持するだけでなく、洗浄滅菌時、その効果を阻害しません。

## 削減された手動ステップ数<sup>2</sup>

インスツルメントを所定の位置から取り外すことなく、トレーと一緒に自動洗浄・乾燥・滅菌工程を行え<sup>3</sup>、大幅に時間を節約


1 ピュアセットトレーは、ピュアセットプレートとグロメットを除き、ステンレススチール製です。

2 ノーベルバイオケア比

3 一部のインスツルメントやドリルは手洗浄が必要になります。詳細は P.17 に記載の推奨洗浄方法をご覧ください。

# 使いやすく衛生的かつ効率的なピュアセット

以下、ウォッシャー・デイスINFЕКター使用時の手順となります。

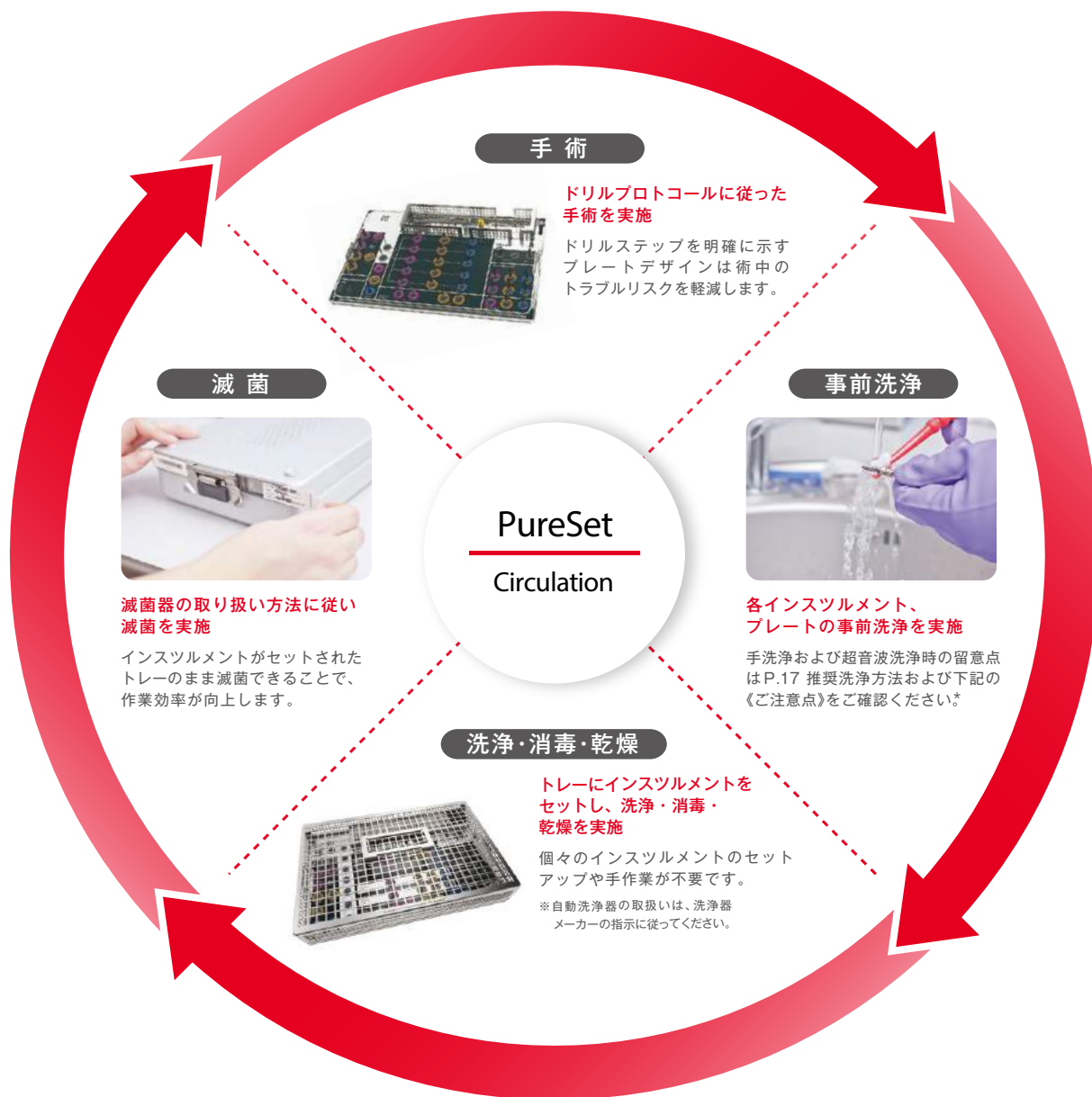

## 《ご注意点》

- ・ プレートの超音波洗浄はできません。
- ・ 推奨のpH8.5~11以外の洗浄液を使用すると、プレートが損傷する可能性があります。
- ・ ウォッシャー・デイスINFЕКター(自動洗浄器)使用時は、トレーからプレートを取り外して別々に洗浄・消毒・乾燥を実施します。
- ・ 滅菌後のピュアセット・トレーは高温多湿、直射日光を避け、常温で清潔な場所に保管してください。

# ノーベルアクティブ ピュアセット

# ノーベルパラレル CC ピュアセット

Freehand  
SURGERY



W276.1 × D176 × H47 (mm)

## ノーベルアクティブ・ピュアセット

#87294

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

PUR0200	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・トレイ
34584	外科用トルクレンチ・ノーベルアクティブ*
32180	サージカルドライバー
32112	方向指示棒 Ø 2 / Ø 2.4 - 2.8 mm (セットには4本入り)
37791	デブスプローブ 7-18 mm Z シェイプ
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
KI589B.204.	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラー
300352	インプラントオーガナイザー
37887	ノーベルアクティブ X線診断用テンプレート
300781	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・ウォールチャート

### インプラントドライバー・CC

	3.0	NP	RP	WP
28 mm	36773	36718	36720	37859
37 mm	36774	36719	36721	37860



## ノーベルパラレルCC・ピュアセット

#87295

PUR0200	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・トレイ
28839	外科用トルクレンチ・リプレイス*
32112	方向指示棒 Ø 2 / Ø 2.4 - 2.8 mm (セットには4本入り)
37791	デブスプローブ 7-18 mm Z シェイプ
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
KI589B.204.	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラー
300352	インプラントオーガナイザー
37792	ノーベルパラレル CC X線診断用テンプレート
300781	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・ウォールチャート

### インプラントドライバー・CC


	NP	RP	WP
28 mm	36718	36720	37859
37 mm	36719	36721	37860



\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

ノーベルアクティブ用とノーベルパラレル CC用の外科用インスツルメントが1つのトレイ (No. PUR0200) に格納できます。  
既にノーベルアクティブ外科用キットまたはノーベルパラレル CC外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただきますと、ノーベルアクティブ・ピュアセットまたはノーベルパラレル CC・ピュアセット一式となります。



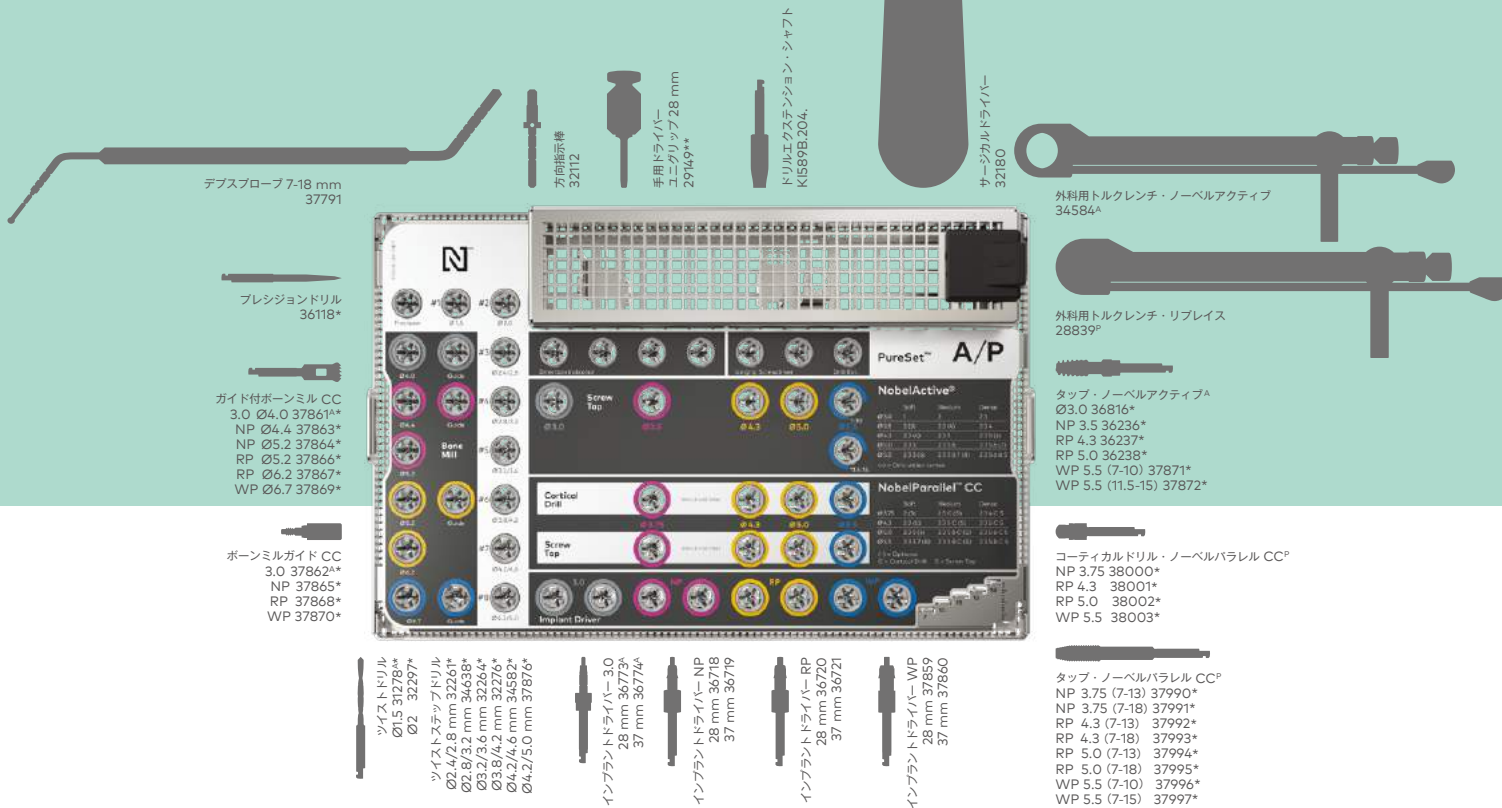

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\* 他の長さのスクレイドライバークのご用意もごさいます。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

タップ・ノーベルアクティブ				
	3.0	NP	RP	WP
Ø 3.0	36816			
Ø 3.5		36236		
Ø 4.3			36237	
Ø 5.0			36238	
Ø 5.5				37871 (7-10 mm) 37872 (11.5-15mm)



タップ・ノーベルパラレル CC			
	NP	RP	WP
Ø 3.75	37990 (7-13 mm) 37991 (7-18 mm)		
Ø 4.3		37992 (7-13 mm) 37993 (7-18 mm)	
Ø 5.0		37994 (7-13 mm) 37995 (7-18 mm)	
Ø 5.5			37996 (7-10 mm) 37997 (7-15 mm)



ドリル	
36118	プレジジョンドリル
35426	ガイドドリル



ツイストドリル (Ø 2mmはチップ付)			
Ø 1.5	31278 (7-15 mm) <sup>A</sup>		
Ø 2.0	32296 (7-10 mm)	32297 (7-15 mm)	32299 (10-18 mm)



ツイストステップドリル			
Ø 2.4/2.8	32260 (7-10 mm)	32261 (7-15 mm)	32262 (10-18 mm)
Ø 2.8/3.2	37873 (7-10 mm)	34638 (7-15 mm)	34639 (10-18 mm)
Ø 3.2/3.6	32263 (7-10 mm)	32264 (7-15 mm)	32265 (10-18 mm)
Ø 3.8/4.2	32275 (7-10 mm)	32276 (7-15 mm)	32277 (10-18 mm)
Ø 4.2/4.6	37874 (7-10 mm)	34582 (7-15 mm)	34583 (10-18 mm)
Ø 4.2/5.0	37875 (7-10 mm)	37876 (7-15 mm)	



コーティカルドリル・ノーベルパラレル CC			
	NP	RP	WP
Ø 3.75	38000		
Ø 4.3		38001	
Ø 5.0		38002	
Ø 5.5			38003



ガイド付ボーンミル CC				
	3.0	NP	RP	WP
Ø 4.0	37861 <sup>A</sup>			
Ø 4.4		37863		
Ø 5.2		37864	37866	
Ø 6.2			37867	
Ø 6.7				37869



ボーンミルガイド CC			
3.0	NP	RP	WP
37862 <sup>A</sup>	37865	37868	37870




ドリルストップ・キット  
87303



# ノーベルテーパード CC ピュアセット

Freehand  
SURGERY

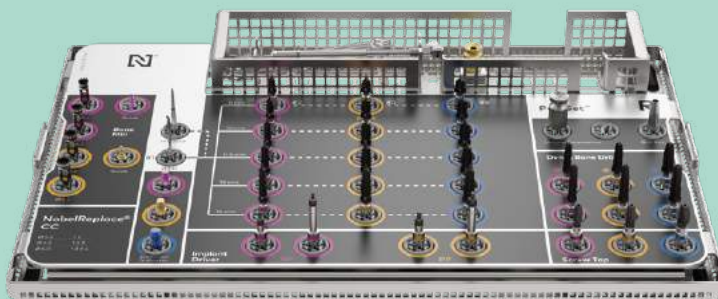

W276.1 × D176 × H47 (mm)

## ノーベルテーパード CC・ピュアセット

#87296

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

<b>PUR0300</b>	ノーベルテーパード CC・ピュアセット・トレイ
28839	外科用トルクレンチ・リブレイス*
29149	手持ドライバー ユニグリップ 28 mm
KI589B.204.	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラー
300352	インプラントオーガナイザー
2042	ゲージニードル
37320	ノーベルリブレイス・テーパード X線診断用テンプレート
<b>300567</b>	ノーベルテーパードCC・ピュアセット・ウォールチャート

\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

デンスボンドリル・テーパード			
	NP	RP	WP
Ø 3.5	29377 (13 mm) 29378 (16 mm)		
Ø 4.3		29380 (13 mm) 29381 (16 mm)	
Ø 5.0			29383 (13 mm) 29384 (16 mm)



テーパードドリル			
	NP	RP	WP
Ø 3.5	32075 (8 mm) 29367 (10 mm) 36113 (11.5 mm) 29368 (13 mm) 29369 (16 mm)		
Ø 4.3		32076 (8 mm) 29370 (10 mm) 36114 (11.5 mm) 29371 (13 mm) 29372 (16 mm)	
Ø 5.0			32077 (8 mm) 29373 (10 mm) 36115 (11.5 mm) 29374 (13 mm) 29375 (16 mm)




方向指示棒・テーパード			タップ・テーパード		
NP	RP	WP	NP	RP	WP
32255	32256	32257	36717	32090	32091



インプラントドライバー・CC			
	NP	RP	
28 mm	36718	36720	
37 mm	36719	36721	



既にノーベルテーパード CC 外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、ノーベルテーパード CC・ピュアセット一式となります。  
一セットにはΦ 3.5、Φ 4.3、Φ 5.0mmのインプラントに必要なインスツルメントが含まれます。  
—こちらのセットはノーベルテーパード CC (PMC 含む) に対応します。

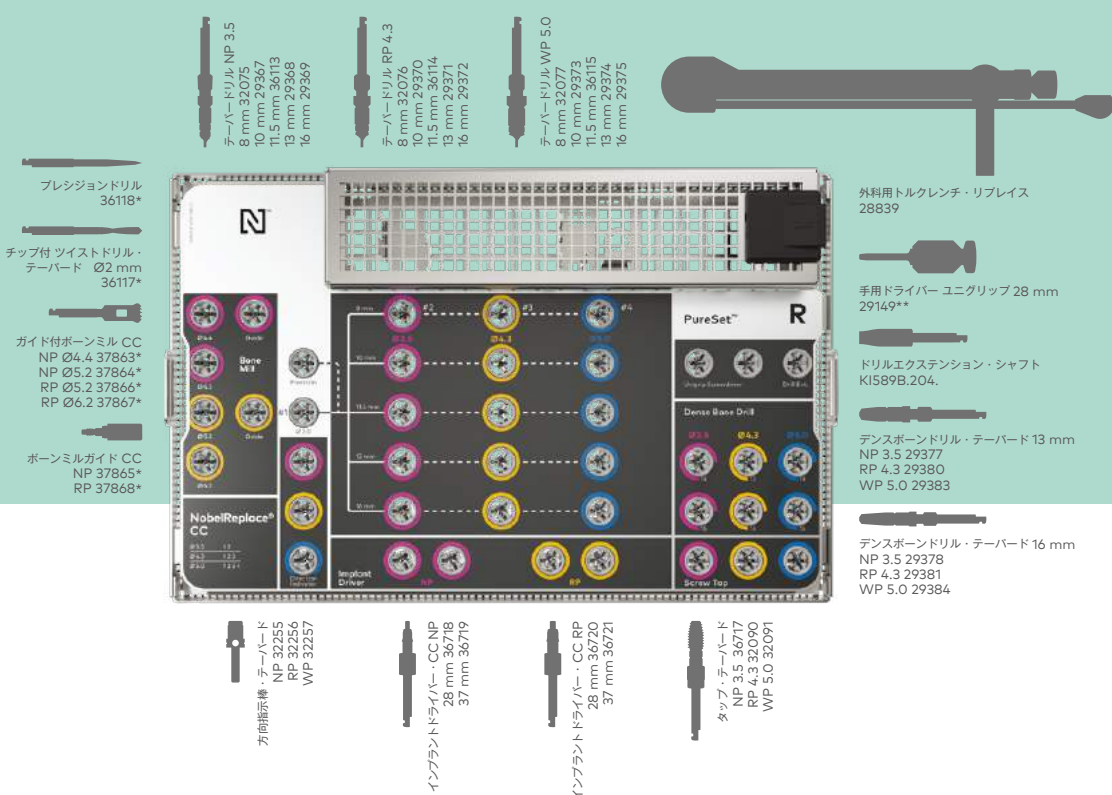

テーパードリル NP 3.5  
8 mm 32075  
10 mm 2937  
11.5 mm 36113  
13 mm 29368  
16 mm 29369

テーパードリル RP 4.3  
8 mm 32076  
10 mm 29370  
11.5 mm 36114  
13 mm 29371  
16 mm 29372

テーパードリル WP 5.0  
8 mm 32077  
10 mm 29373  
11.5 mm 36115  
13 mm 29374  
16 mm 29375

プレジジョンドリル  
36118\*

チップ付 ツイストドリル・  
テーパード Ø2 mm  
36117\*

ガイド付ボーンミル CC  
NP Ø4.4 37863\*  
NP Ø5.2 37864\*  
RP Ø5.2 37866\*  
RP Ø6.2 37867\*

ボーンミルガイド CC  
NP 37865\*  
RP 37868\*

外科用トルクレンチ・リプレイス  
28839

手用ドライバー ユニクリップ 28 mm  
29149\*\*

ドリルエクステンション・シャフト  
K1589B.204.

デンスボーンドリル・テーパード 13 mm  
NP 3.5 29377  
RP 4.3 29380  
WP 5.0 29383

デンスボーンドリル・テーパード 16 mm  
NP 3.5 29378  
RP 4.3 29381  
WP 5.0 29384

方向指示棒・テーパード  
NP 32255  
RP 32256  
WP 32257

インプラントドライバー・CC NP  
28 mm 36718  
37 mm 36719

インプラントドライバー・CC RP  
28 mm 36720  
37 mm 36721

タップ・テーパード  
NP 3.5 36717  
RP 4.3 32090  
WP 5.0 32091

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\* 他の長さのスクレュードライバーのご用意もございます。

セットに含まれていないもの (必要に応じてご購入ください)

ガイド付ボーンミル CC		
	NP	RP
Ø 4.4	37863	
Ø 5.2	37864	37866
Ø 6.2		37867



ボーンミルガイド CC		
	NP	RP
	37865	37868




ドリル		
36118	プレジジョンドリル	
35426	ガイドドリル	
36117	チップ付ツイストドリル・テーパード Ø2 mm	

# ブローネマルクシステム ピュアセット

## ノーベルスピーディー・ グルービー ピュアセット

Freehand  
SURGERY

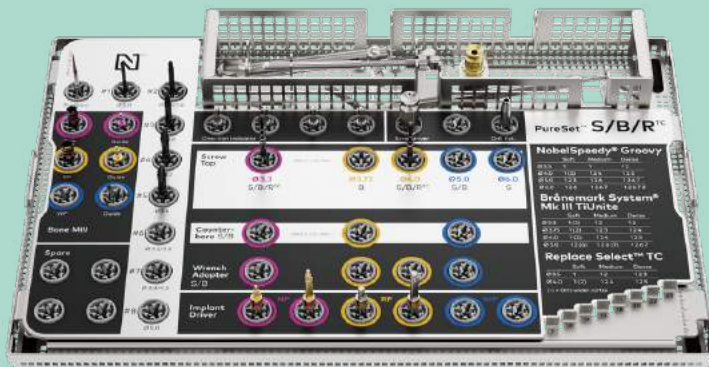

W276.1 × D176 × H47 (mm)

## ブローネマルクシステム・ピュアセット #87298

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

PUR0900	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム/RepSel TC・ピュアセット・トレイ
32110	外科用トルクレンチ・ブローネマルクシステム*
29132	インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk RP 12mm
32112	方向指示棒 Ø 2 / Ø 2.4 - 2.8 mm (セットには4本入り)
37791	デブスプローブ 7-18 mm Z シェイプ
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
DIB 097-0	Bmk カバースクリュードライバー・ヘキサゴン
KI589B.204	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラ
300352	インプラントオーガナイザー
33097	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム X線診断用テンプレート
301381	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム・ピュアセット・ウォールチャート

インプラントドライバー・Bmk

	RP
21 mm	29129
26 mm	29130



セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

インプラントドライバー・Bmk

	RP
34 mm	29131



インプラントドライバー・レンチアダプター・Bmk

	RP
21 mm	29133



\* トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

ブローネマルクシステム用とノーベルスピーディー・グルービー用の外科用インスツルメントが1つのトレイ (No. PUR0900) に格納できます。  
既にブローネマルクシステム外科用キットまたはノーベルスピーディー・グルービー外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、ブローネマルクシステム・ピュアセットまたはノーベルスピーディー・グルービー・ピュアセット一式となります。

## ノーベルスピーディー・グルービー・ ピュアセット #87297

PUR0900	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム/RepSel TC・ピュアセット・トレイ
32110	外科用トルクレンチ・ブローネマルクシステム*
29128	インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk NP 21mm
29132	インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk RP 12mm
29136	インプラントドライバー・レンチアダプター Bmk WP 12mm
32112	方向指示棒 Ø 2 / Ø 2.4 - 2.8 mm (セットには4本入り)
37791	デブスプローブ 7-18 mm Z シェイプ
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
DIB 097-0	Bmk カバースクリュードライバー・ヘキサゴン
KI589B.204	ドリルエクステンションシャフト ブラッセラ
300352	インプラントオーガナイザー
37628	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム X線診断用テンプレート
301381	ノーベルスピーディー・グルービー/ ブローネマルクシステム・ピュアセット・ウォールチャート

インプラントドライバー・Bmk

	NP	RP	WP
21 mm	—	29129	29134
26 mm	29126	29130	29135
34 mm	29127	—	—



ノーベルスピーディー デブスプローブ

18-25mm	37692
---------	-------







# ノーベルアクティブ ガイデッド・ピュアセット

Guided  
SURGERY



W276.1 × D176 × H58.9 (mm)

## ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセット #87305

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

PUR0600 ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセットレー	
30909	ガイデッド・アンカーピン Ø1.5 mm (セットには3本入り)
29149	手用ドライバーユニグリップ 28 mm
29151	マシンドライバーユニグリップ 20 mm
34584	外科用トルクレンチ ノーベルアクティブ*
29167	補綴用トルクレンチアダプター
33065	タップホルダー・リブレイス
301165 ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセット・ウォールチャート	

\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

### ガイデッド・ドリルガイド

	NP	RP 4.3
Ø 2.0 mm	32814	32815
Ø 2.8 mm	32817	32818
Ø 3.2 mm	35882	32822
Ø 3.6 mm		35883
Ø 4.2 mm		35884



### ガイデッド・インプラントマウント ノーベルアクティブ (セットには2本入り)

NP	RP 4.3
35887	35888



### ガイデッド・テンプレートアバットメント・スクリー付 ノーベルアクティブ (セットには2本入り)

NP	RP 4.3
35890	35891



### ガイデッド・マシン用歯肉パンチ スリーブ用

NP	RP 4.3
37153	37154



既にノーベルアクティブ・ガイデッド外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただきますと、ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセット一式となります。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

### ガイデッド・ツイストドリル (アンカーピン用)

Ø 1.5 x 20 mm	33066
---------------	-------



### ノーベルアクティブ 3.0用 ガイデッド・パイロット ツイストドリル

Ø 1.5 mm (10+) 10-15 mm	37397
-------------------------	-------



### ガイデッド・ツイストドリル

Ø 2.0 (10+) 7-13 mm	33107
Ø 2.0 (10+) 7-18 mm	32746



### ガイデッド・ツイストステップドリル


	7-13 mm	7-18 mm
Ø 2.4/2.8 (10+)	35839	35844
Ø 2.8/3.2 (10+)	35840	35875
Ø 3.2/3.6 (10+)	35841	35876
Ø 3.8/4.2 (10+)	35842	35877
Ø 4.2/4.6 (10+)	35843	38045
Ø 4.2/5.0 (10+)	37934	37945



### ガイデッド・ドリルガイド

	RP 5.0	WP
Ø 2.0 mm	32816	32816
Ø 2.8 mm	38046	38046
Ø 3.6 mm	35885	35885
Ø 4.2 mm	32825	32825
Ø 4.6 mm	35886	35886
Ø 5.0 mm		32826



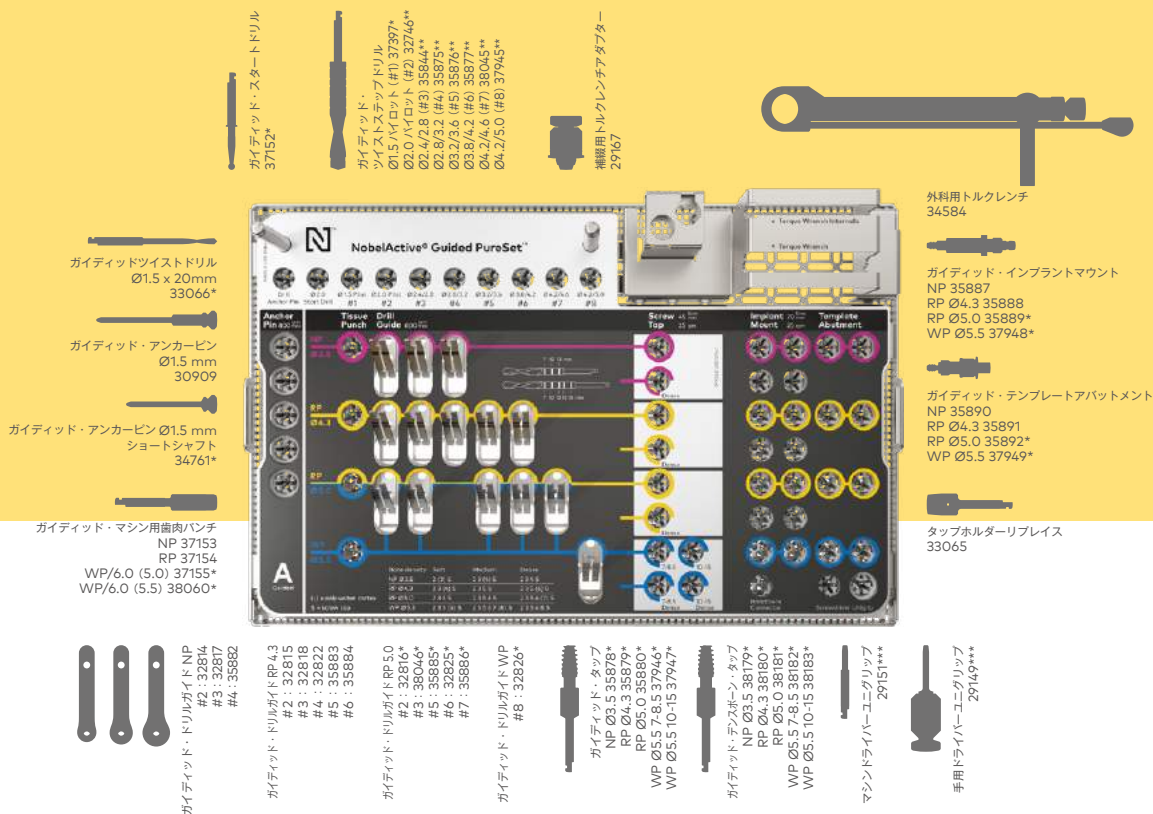

ガイドッドツイストドリル  
Ø1.5 x 20mm  
33066\*

ガイドッド・アンカーピン  
Ø1.5 mm  
30909

ガイドッド・アンカーピン Ø1.5 mm  
ショートシャフト  
34761\*

ガイドッド・マシン用歯肉バンチ  
NP 37153  
RP 37154  
WP/6.0 (5.0) 37155\*  
WP/6.0 (5.5) 38060\*




ガイドッド・ドリルガイド NP  
#2 : 32814  
#3 : 32817  
#4 : 35862


ガイドッド・ドリルガイド RP 4.3  
#2 : 32815  
#3 : 32818  
#4 : 32822  
#5 : 35883  
#6 : 35884

ガイドッド・ドリルガイド RP 5.0  
#3 : 38046\*  
#5 : 35885\*  
#6 : 32825\*  
#7 : 35886\*

ガイドッド・ドリルガイド WP  
#8 : 32826\*

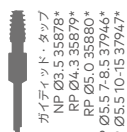

ガイドッド・タップ  
NP Ø3.5 35878\*  
RP Ø4.3 35879\*  
RP Ø5.0 35880\*  
WP Ø5.5 7-8.5 37946\*  
WP Ø5.5 10-15 37947\*

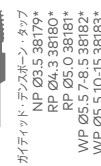

ガイドッド・テンプレートアパットメント  
NP Ø3.5 38179\*  
RP Ø4.3 38180\*  
RP Ø5.0 38181\*  
WP Ø5.5 7-8.5 38182\*  
WP Ø5.5 10-15 38183\*

マシンドライバークリップ  
29151\*\*\*



手用ドライバークリップ  
29149\*\*\*

外科用トルクレンチ  
34584

ガイドッド・インプラントマウント  
NP 35887  
RP Ø4.3 35888  
RP Ø5.0 35889\*  
WP Ø5.5 37948\*

ガイドッド・テンプレートアパットメント  
NP 35890  
RP Ø4.3 35891  
RP Ø5.0 35892\*  
WP Ø5.5 37949\*

タップホルダープレース  
33065

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\*セットには含まれておりません。他の長さのご用意もございません。 \*\*\*他の長さのスクレイドライバーのご用意もございません。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ガイドッド・タップ ノーベルアクティブ			
	NP	RP	WP
Ø 3.5 mm	35878 (8.5-10 mm)		
Ø 4.3 mm		35879 (8.5-10 mm)	
Ø 5.0 mm		35880 (8.5-10 mm)	
Ø 5.5 mm			37946 (7-8.5 mm)* 37947 (10-15 mm)**



ガイドッド・デンスボン・タップ ノーベルアクティブ			
	NP	RP	WP
Ø 3.5 mm	38179 (8.5-18 mm)		
Ø 4.3 mm		38180 (8.5-18 mm)	
Ø 5.0 mm		38181 (8.5-18 mm)	
Ø 5.5 mm			38182 (7-8.5 mm)* 38183 (10-15 mm)**



ガイドッド・インプラントマウント ノーベルアクティブ	
RP 5.0	WP
35889	37948



ノーベルアクティブ専用です。ノーベルテーブルド CC およびノーベルパラレル CC にはご使用頂けません。

ガイドッド・テンプレート アパットメント・スクリュー付	
RP 5.0	WP
35892	37949



ノーベルテーブルド CC およびノーベルパラレル CC 用としてもご使用頂けます。品番・品名は異なりますが、サイズ・デザインは同じです。

ガイドッド・マシン用 歯肉バンチ スリーブ用	
RP 5.0	WP
37155	38060***



ガイドッド・手用歯肉バンチ (5個入り)		
NP	RP	WP
32Z2006	32Z2007 (4.3)	32Z2008
32Z2008 (5.0)		



ガイドッド・スタートドリル	
Ø 2.0 (10+)	
	37152



ガイドッド・アンカーピン	
Ø 1.5 mm ショートシャフト	
	34761



ガイドッド・ドリルストップ・キット	
	87304



ガイドッド・ドリルガイド用ハンドル	
	32813



\* No.37946 および No.38182 は、ノーベルアクティブ WP インプラント 7-8.5mm 用です。  
 \*\* No.37947 および No.38183 は、ノーベルアクティブ WP インプラント 10-15mm 用です。  
 \*\*\* No.38060 ガイドッド歯肉バンチ WP スリーブ (5.5mm 用) は、ノーベルアクティブ WP 5.5 およびノーベルパラレル CC WP 5.5-インプラント用です。No.37155 ガイドッド歯肉バンチ WP/6.0 スリーブ用 (5.0mm 用) および No.37156 ガイドッド歯肉バンチ WP/6.0 スリーブ用 (6.0mm 用) は、ノーベルアクティブ WP 5.5 およびノーベルパラレル CC WP 5.5-インプラントにご使用になれませんので、ご注意ください。

# ノーベルパラレル CC ガイドッド・ピュアセット



Guided  
SURGERY

W276.1 × D176 × H58.9 (mm)

## ノーベルパラレル CC・ガイドッド・ピュアセット

#87306

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

<b>PUR0700</b>	ノーベルパラレル CC・ガイドッド・ピュアセット・トレー
30909	ガイドッド・アンカーピン Ø 1.5 mm (セットには3本入り)
29149	手用ドライバー ユニグリップ 28 mm
29151	マシンドライバー ユニグリップ 20 mm
28839	外科用トルクレンチ・リリース*
29167	補綴用トルクレンチアダプター
33065	タップホルダー・リリース
<b>301166</b>	ノーベルパラレル CC・ガイドッド・ピュアセット・ウォールチャート

\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

ガイドッド・ドリルガイド

	NP	RP 4.3
Ø 2.0 mm	32814	32815
Ø 2.8 mm	32817	32818
Ø 3.2 mm	35882	
Ø 3.6 mm		35883



ガイドッド・インプラントマウント  
ノーベルパラレル CC (セットには2本入り)

NP	RP 4.3
38065	38066



ガイドッド テンプレートアパットメント・スクリュー付 CC  
(セットには2本入り)

NP	RP 4.3
38069	37158



ガイドッド・マシン用歯肉バンチ スリーブ用

NP	RP 4.3
38059	37154



ノーベルパラレル CC・ガイドッド・サージェリーに必要な NP および RP4.3 用のインスツルメントが含まれます。ドリル、カウンターボア、タップはセットに含まれておりませんので、別途ご購入願います。既にノーベルパラレル CC・ガイドッド外科用キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、ノーベルパラレル CC・ガイドッド・ピュアセット一式となります。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ガイドッド・ツイストドリル (アンカーピン用)  
Ø 1.5 x 20 mm 33066




ガイドッド・ツイストドリル  
Ø 2.0 (10+) 7-13 mm 33107  
Ø 2.0 (10+) 7-18 mm 32746



ガイドッド・ツイストステップドリル  
7-13 mm 7-18 mm  
Ø 2.4/2.8 (10+) 35839 35844  
Ø 2.8/3.2 (10+) 35840 35875  
Ø 3.2/3.6 (10+) 35841 35876  
Ø 3.8/4.2 (10+) 35842 35877  
Ø 4.2/4.6 (10+) 35843 38045  
Ø 4.2/5.0 (10+) 37934 37945




ガイドッド・ドリルガイド  
RP 5.0 WP  
Ø 2.0 mm 32816 32816  
Ø 2.8 mm 38046 38046  
Ø 3.6 mm 35885 35885  
Ø 4.2 mm 32825 32825  
Ø 4.6 mm 35886  
Ø 5.0 mm 32826

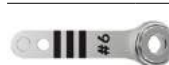

ガイドッド・カウンターボア・ノーベルパラレル CC  
Ø 3.75 38061  
Ø 4.3 38062  
Ø 5.0 38063  
Ø 5.5 38064





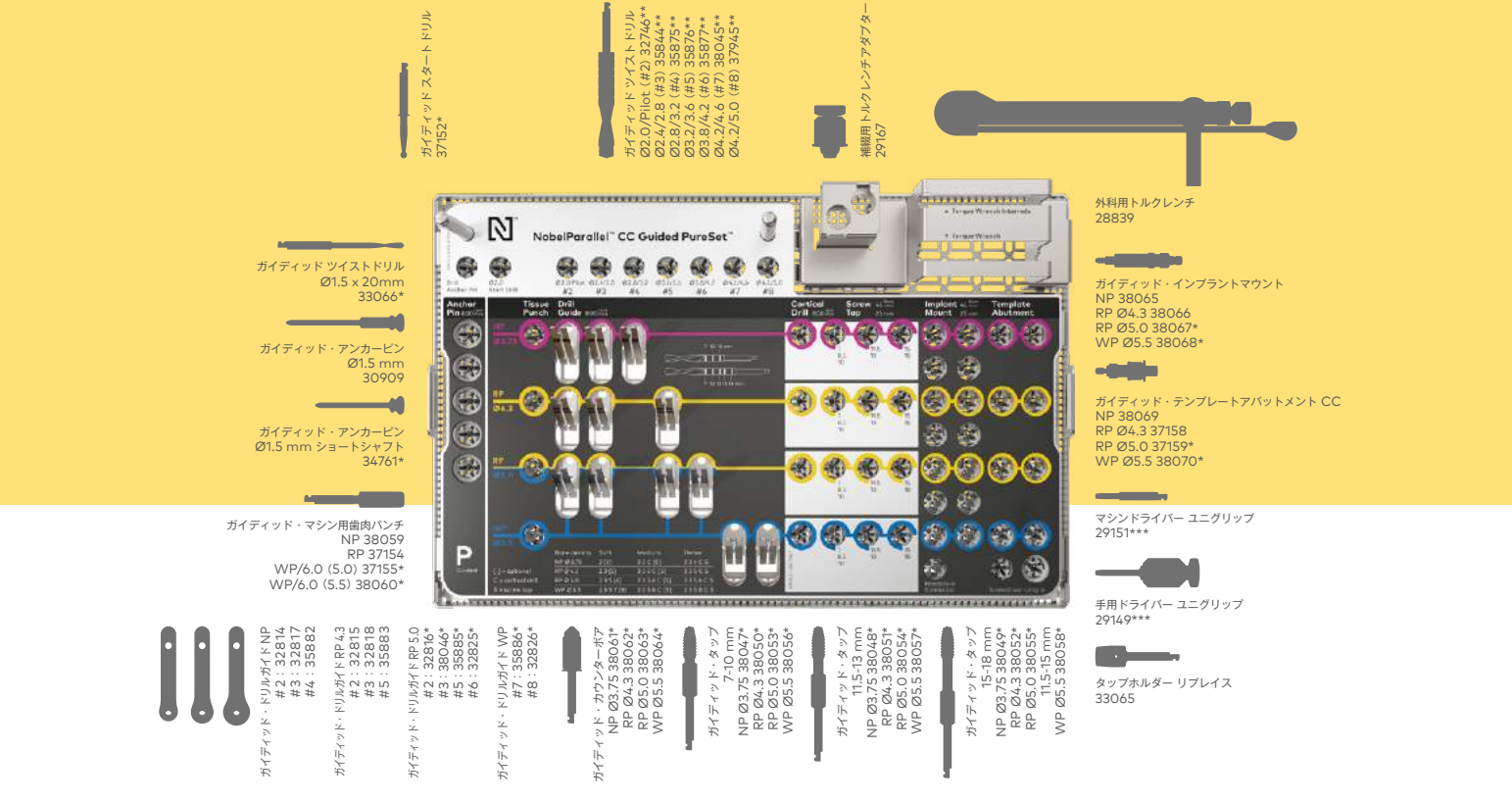

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\*セットには含まれておりません。他の長さのご用意もございます。 \*\*\*他の長さのスクリードライバーのご用意もございます。

セットに含まれていないもの(必要に応じてご購入ください)

ガイドッド・タップ・ノーベルパラレル CC			
	NP	RP	WP
Ø 3.75	38047(7-10 mm) 38048(11.5-13 mm) 38049(15-18 mm)		
Ø 4.3		38050(7-10 mm) 38051(11.5-13 mm) 38052(15-18 mm)	
Ø 5.0		38053(7-10 mm) 38054(11.5-13 mm) 38055(15-18 mm)	
Ø 5.5			38056(7-10 mm) 38057(11.5-13 mm) 38058(11.5-15 mm)



ガイドッド・マシン用歯肉パンチ スリーブ用	
RP 5.0	WP
37155	38060*



コンバインド・オープンエンドレンチ	
33247	



ガイドッド・手用歯肉パンチ (5個入り)		
NP	RP	WP
32Z2006	32Z2007 (4.3)	32Z2008
32Z2008 (5.0)		



ガイドッド・スタートドリル	
Ø 2.0 (10+)	37152



ガイドッド・インプラントマウント ノーベルパラレル CC	
RP 5.0	WP
38067	38068



ノーベルテーパード CC と互換性があります。  
ノーベルアクティブにはご使用頂けません。

ガイドッド・テンプレート アパットメント・スクリュー付 CC	
RP 5.0	WP
37159	38070



ノーベルテーパード CC およびノーベルアクティブ  
としてもご使用頂けます。品番・品名は異なりますが、  
サイズ・デザインは同じです。

ガイドッド・ドリルストップ・キット	
87304	




ガイドッド・アンカーピン	
Ø 1.5 mm ショートシャフト	34761



\*No.38060 ガイドッド歯肉パンチ WPスリーブ (5.5mm用) は、ノーベルアクティブ WP 5.5 およびノーベルパラレル CC WP 5.5・インプラント用です。  
No.37155 ガイドッド歯肉パンチ WP/6.0 スリーブ用 (5.0mm用) および No.37156 ガイドッド歯肉パンチ WP/6.0 スリーブ用 (6.0mm用) は、ノーベルアクティブ WP 5.5 および  
ノーベルパラレル CC WP 5.5・インプラントにご使用になれませんので、ご注意ください。

# ノーベルテーパード CC ガイドッド・ピュアセット

Guided  
SURGERY

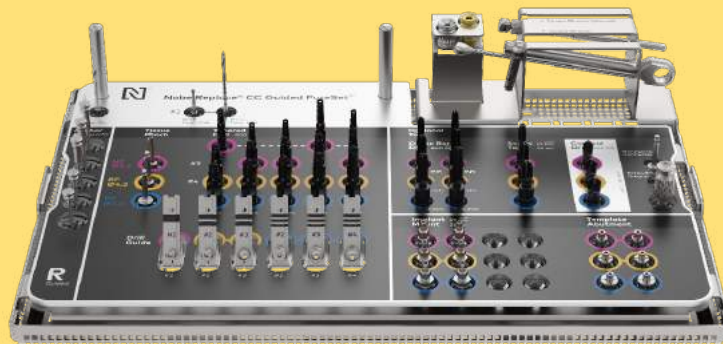

W276.1 × D176 × H58.9 (mm)

## ノーベルテーパード CC・ガイドッド・ピュアセット #87307

セットに含まれるもの(単品でのご購入も可能です)

<b>PUR0800</b>	ノーベルテーパード CC・ガイドッド・ピュアセット・トレー
30909	ガイドッド・アンカーピン Ø 1.5 mm (セットには3本入り)
29149	手用ドライバー ユニグリップ28 mm
29151	マシンドライバー ユニグリップ 20 mm
28839	外科用トルクレンチ・リプレイス*
29167	補綴用トルクレンチアダプター
33065	タップホルダー・リプレイス
<b>301167</b>	ノーベルテーパード CC・ガイドッド・ピュアセット・ウォールチャート

\*トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

ガイドッド・ドリルガイド	
	NP RP 4.3
Ø 2.0 mm	32814 32815 
テーパード RP - NP	33018 

ガイドッド・ドリル・テーパード		
	NP	RP 4.3
(+) 8 mm	32827	32831
(+) 10 mm	32828	32832
(+) 11.5 mm	36119	36120
(+) 13 mm	32829	32833
(+) 16 mm	32830	32834



ガイドッド・デンスボンドリル・テーパード		
	NP	RP 4.3
13 mm	32844	32847
16 mm	32845	32848



ガイドッド・タップ・テーパード		
	NP	RP 4.3
37171**		32858



\*\*ノーベルテーパード CCインプラント NP の埋入高形成にタップを使用する場合、必ずガイドッド・タップ・テーパード NP (No.37171) を使用してください。なお、タップ・テーパード NP (No.37171) はノーベルバイオケア・テーパード・インプラントに共用です。

ガイドッド・インプラントマウント NobRpl CC (セットには2本入り)		
	NP	RP 4.3
	37149	37150




ガイドッド・テンプレートアバットメント・ スクリュー付 CC (セットには2本入り)		
	NP	RP 4.3
	37157	37158



ガイドッド・マシン用歯肉パンチ スリーブ用		
	NP	RP 4.3
	37153	37154



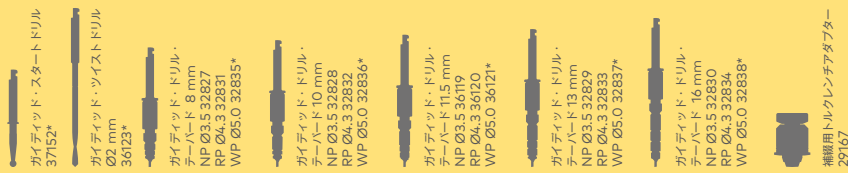

ガイドッド・スタートドリル  
37152\*

ガイドッド・ツイストドリル  
Ø2 mm  
36123\*

ガイドッド・ドリル・  
テーパード 8 mm  
NP Ø3.5 32827  
RP Ø4.3 32831  
WP Ø5.0 32835\*

ガイドッド・ドリル・  
テーパード 10 mm  
NP Ø3.5 32828  
RP Ø4.3 32832  
WP Ø5.0 32836\*

ガイドッド・ドリル・  
テーパード 11.5 mm  
NP Ø3.5 36119  
RP Ø4.3 36120  
WP Ø5.0 36121\*

ガイドッド・ドリル・  
テーパード 13 mm  
NP Ø3.5 32829  
RP Ø4.3 32833  
WP Ø5.0 32837\*

ガイドッド・ドリル・  
テーパード 16 mm  
NP Ø3.5 32830  
RP Ø4.3 32834  
WP Ø5.0 32838\*

補綴用トルクレンチアダプター  
29167



外科用トルクレンチ  
28839


タップホルダー  
33065

マシンドライバー ユニグリップ  
29151\*\*\*

手持ドライバ ユニグリップ  
29149\*\*\*

ガイドッド・インプラントマウント  
NP Ø3.5 37149  
RP Ø4.3 37150  
RP Ø5.0 37151\*

ガイドッド・テンプレートアパットメント  
NP Ø3.5 37157  
RP Ø4.3 37158  
RP Ø5.0 37159\*

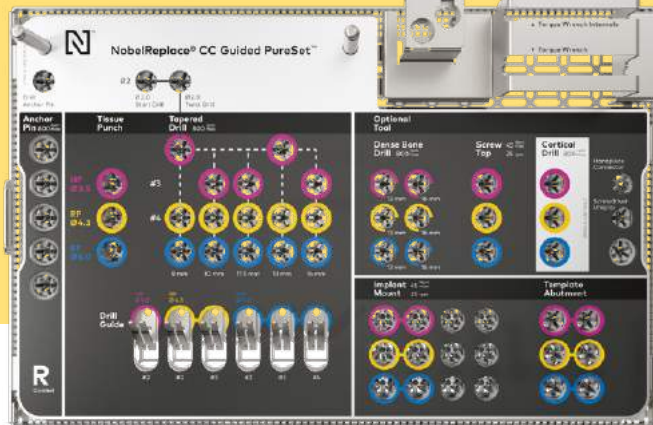

ガイドッド・ツイストドリル  
Ø1.5 x 20mm  
33066\*

ガイドッド・アンカーピン  
Ø1.5 mm  
30909

ガイドッド・アンカーピン  
Ø1.5 mm ショートシャフト  
34761\*

ガイドッド・マシン用歯肉パンチ  
NP 37153  
RP 37154  
WP/6.0 (5.0) 37155\*

ガイドッド・ドリルガイド  
NP #2 : 32814  
RP #2 : 32815  
RP #3 : 33018  
RP #2 : 32816\*  
WP #3 : 33019\*  
WP #4 : 33020\*

ガイドッド・デンスボーン・  
ドリル  
13 mm  
NP Ø3.5 32844  
RP Ø4.3 32847  
WP Ø5.0 32850\*

ガイドッド・デンスボーン・  
ドリル  
16 mm  
NP Ø3.5 32845  
RP Ø4.3 32848  
WP Ø5.0 32851\*

ガイドッド・タップマウント  
NP Ø3.5 37171  
RP Ø4.3 32856  
WP Ø5.0 32860\*

ガイドッド・カウンターボア  
NP Ø3.5 37167\*  
RP Ø4.3 37168\*  
WP Ø5.0 37169\*

\*セットには含まれておりません。必要に応じて別途ご購入をお願いします。 \*\*セットには含まれておりません。他の長さのご用意もございません。 \*\*\*他の長さのスクレイドライバーのご用意もございません。

ガイドッド・ツイストドリル

Ø 1.5 x 20 mm 33066

テーパード 36123

Ø 2.0 x (10+) 8-16 mm

ガイドッド・デンスボーンドリル・テーパード

WP

13 mm 32850

16 mm 32851

ノーベルテーパード CC RP Φ 5.0 に使用します。

ガイドッド・ドリル・テーパード

WP

(+) 8 mm 32835

(+) 10 mm 32836

(+) 11.5 mm 36121

(+) 13 mm 32837

(+) 16 mm 32838

ノーベルテーパード CC RP Φ 5.0 に使用します。

ガイドッド・ドリルガイド

RP 5.0

WP/6.0 -Ø 2.0 mm 32816

テーパード 33019

WP/6.0 - NP

テーパード 33020

WP/6.0 - RP

ガイドッド・カウンターボア

Ø 3.5 37167\*

Ø 4.3 37168\*

Ø 5.0 37169\*

ガイドッド・タップ・テーパード

WP

32860

ノーベルテーパード CC RP Φ 5.0 に使用します。

ガイドッド・インプラントマウント  
NobRpl CC

RP 5.0

37151

ガイドッド・テンプレート  
アパットメント・スクレイド付 CC

RP 5.0

37159

\*上記カウンターボアはノーベルバイオケア・テーパード・インプラント (Rpl/NobRpl テーパード、PS、CC・インプラント) にご使用ください。

ガイドッド・インプラントマウント・NobRpl CC はノーベルテーパード CC インプラント用ですが、ノーベルパラレル CC インプラントにもご使用できます。但し、ノーベルアクティブにはご使用できません。

ノーベルアクティブおよびノーベルパラレル CC 用としてもご使用頂けます。品番・品名は異なりますが、サイズ・デザインは同じです。

ガイドッド・マシン用  
歯肉パンチ スリーブ用

RP 5.0

37155

ガイドッド・手持歯肉パンチ (5個入り)

NP RP WP

32Z2006 32Z2007 (4.3) 32Z2008

32Z2008 (5.0)

ガイドッド・スタートドリル

Ø 2.0 (10+) 37152

ガイドッド・アンカーピン

Ø1.5mm ショートシャフト 34761

コンバインド・オープンエンドレンチ

33247

ゲージニードル


2042

ガイドッド・ドリルガイド用ハンドル

32813

リプレイスセレクト・テーパード埋入時には、ガイドッド・インプラントマウント・NobRpl (NP : 32864, RP : 32866, WP : 32869, 6.0 : 32871) およびガイドッド・テンプレート・アパットメント NobRpl (NP : 32803, RP : 32805, WP : 32808, 6.0 : 32811) を個別にご購入ください。

# 補綴用ピュアセット・ベーシック

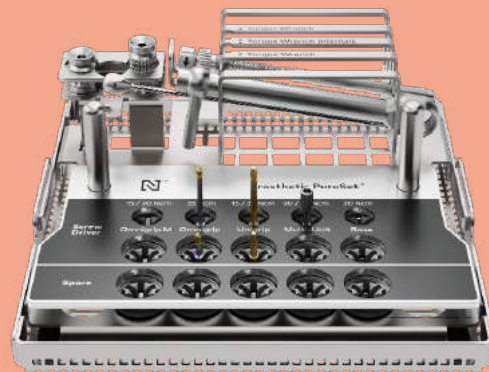

W122.1 × D115 × H45.6 (mm)

## Prosthetics

### 補綴用ピュアセット・ベーシック

#87301

セットに含まれるもの (単品でのご購入も可能です)

PUR0500 補綴用ピュアセットトレー

301232 補綴用ピュアセット・ベーシック・ウォールチャート

ハンドル・マシンインストルメント用

29161



補綴用トルクレンチ

29165\*



マシンドライバー ユニグリップ

20 mm 29151



30 mm 29153



マシンドライバー マルチユニット・アパットメント用

21 mm 29158



\* 補綴用トルクレンチ (No.29165) には、トルクレンチアダプター (No.29167) が含まれます。トルクレンチはパーツを個別に分解して洗浄します。

マシンドライバー オムニグリップ

20 mm 37379



30 mm 37381



既に補綴キットをお持ちのお客様は、上記赤字の製品を追加購入いただけますと、補綴用ピュアセット・ベーシック一式となります。

セットに含まれていないもの (必要に応じてご購入ください)

手用ドライバー ユニグリップ

20 mm 29148



28 mm 29149



36 mm 29150



手用ドライバー オムニグリップ

20 mm 37376



28 mm 37377



36 mm 37378



手用ドライバー オムニグリップ ミニ

20 mm 300855



36 mm 300856



手用ドライバー マルチユニット・アパットメント用

25 mm 29156






ハンドル マシン  
インストゥルメント用  
29161

補綴用トルクレンチ  
29165



※ Base (=NobelBiocare N1™ Base) は N1 関連製品のため、  
現在お取扱いはありません。  
Multi-Unit 左側のトルク値 (20) は NobelBiocare N1™ 補綴  
用のトルク値を示しています。

\* 他の長さのスクレュードライバーのご用意もございます。

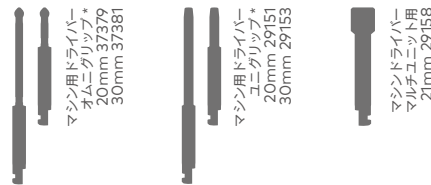

マシン用ドライバー  
オムニグリップ\*  
20mm 37379  
30mm 37381

マシン用ドライバー  
ユニグリップ\*  
20mm 29151  
30mm 29153

マシン用ドライバー  
マルチユニット用  
21mm 29158

セットに含まれていないもの (必要に応じてご購入ください)

マシン用ドライバー ユニグリップ	
25 mm	29152
35 mm	29154

マシン用ドライバー オムニグリップ	
25 mm	37380
35 mm	37382

マシン用ドライバー オムニグリップ ミニ	
20mm	300852
28mm	300853
36mm	300854

## ピュアセット・トレイ アクセサリー

スペアパーツ (プレート) \*

PUR0201	ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC・ピュアセット・プレート
PUR0301	ノーベルテーパーボードCC・ピュアセット・プレート
PUR0901	ノーベルスピーディー・グルービー/フローネマルクスシステム/ RepSel TC・ピュアセット・プレート
PUR0601	ノーベルアクティブ・ガイデッド・ピュアセット・プレート
PUR0701	ノーベルパラレルCC・ガイデッド・ピュアセット・プレート
PUR0801	ノーベルテーパーボードCC・ガイデッド・ピュアセット・プレート
PUR0501	補綴用ピュアセット・プレート



\* プレートには、インストゥルメントやドリルを保持する部分は含まれておりません。  
ご購入の際には、各ピュアセットに応じたプレートをお求めください。

一般的名称 :

歯肉切除メス  
歯科インプラント補綴用器具  
歯科用インプラント手術器具  
手術用ドリルアタッチメント  
手術用ドリルビット

医療機器届出番号 : 13B1X00052000010

医療機器届出番号 : 13B1X00052000018, 13B1X00052000053

医療機器届出番号 : 13B1X00052000001, 13B1X00052000011, 13B1X00052000026, 13B1X00052000034, 13B1X00052000047

医療機器届出番号 : 13B1X00052000021, 13B1X00052000022, 13B1X00052000023, 13B1X00052000034, 13B1X00052000047

医療機器届出番号 : 13B1X00052000017, 13B1X00052000019, 13B1X00052000020, 13B1X00052000034, 13B1X00052000047,  
13B1X00052000054

# ピュアセット シリーズ – 推奨洗浄方法

## 洗浄、消毒、乾燥

### ▶ 自動洗浄、消毒、乾燥（前洗浄含む）の場合

- 1 ピュアセット・トレー（以下、トレー）から、複数のパーツで組み立てられているインスツルメント（例：外科用トルクレンチなど）を取り外し、マニュアルに記載の方法に従って、パーツを分解し、洗浄します。
- 2 洗浄し難い箇所（例：内部注水用ホール等）があるドリル等をすべて取り外し、マニュアルに記載の方法に従って、洗浄します。
- 3 トレーからピュアセット・プレートを取り外します。
- 4 トレー、インスツルメント、ドリル（プレートが無い状態）を40℃の0.5%弱アルカリ性洗浄溶液が入った超音波洗浄器に入れ、5～10分間処理します。（超音波洗浄器および洗浄剤メーカーの使用説明書に従ってください。）なお、個別洗浄した外科用トルクレンチは、トレーに戻して超音波洗浄は行わず、個別に分解、洗浄処理を行います。  
※プレートは、超音波洗浄器で処理しないでください。
- 5 トレーとプレートを別々にウォッシャー・ディスインフェクターに入れ、自動洗浄と消毒を実施します。
- 6 ウォッシャー・ディスインフェクター 製造販売元の指示に従って、トレーとプレートを乾燥させます。  
※注意：pH8.5～11以外の洗浄剤を使用するとプレートが変色や損傷する可能性があります。

### ▶ 手作業での洗浄、消毒、乾燥の場合

- 1 トレーから、複数のパーツで組み立てられているインスツルメント（例：外科用トルクレンチなど）を取り外し、マニュアルに記載の洗浄方法に従って、パーツを分解、洗浄します。
- 2 洗浄し難い箇所（例：内部注水用ホール等）があるドリル等をすべて取り外し、マニュアルに記載の方法に従って、洗浄します。
- 3 トレーからピュアセット・プレートを取り外します。
- 4 目視できるすべての汚れが取り除かれるまで、ナイロン製の柔らかいブラシを使用して、流水（水道水）でトレーを洗浄します。
- 5 プレートは、ナイロン製の柔らかいブラシに40℃の0.5%弱アルカリ性洗浄溶液をつけ、目視できる全ての汚れが除去されるまで洗浄します。  
※注意：pH8.5～11以外の洗浄剤を使用するとプレートが変色や損傷する可能性があります。
- 6 流水（水道水）でプレートをすすぎ、洗浄剤の製造販売元の指示に従って洗浄液を落とします。
- 7 目視できるすべての汚れを取り除くまで、グロメット（インスツルメントを保持している部分）を洗い流します。
- 8 40℃の0.5%弱アルカリ性洗浄溶液を用いて、トレー、インスツルメント、ドリル（プレートが無い状態）を超音波洗浄器で5～10分間処理します。（超音波洗浄器および洗浄剤の使用に関しては、製造販売元の取扱説明書に従ってください。）なお、個別洗浄した外科用トルクレンチは、トレーに戻して超音波洗浄は行わず、個別に分解、洗浄処理を行います。  
※プレートは、超音波洗浄器で処理しないでください。
- 9 流水（水道水）で、トレーを濯ぎ、洗浄液を落とします。
- 10 圧縮エアでトレーとプレートを乾燥させます。
- 11 室温（20±10℃）の状態で、消毒液にトレーを12分間浸します。プレートは、消毒液に入れしないでください。
- 12 清拭消毒でプレートを1分±10秒間消毒します。（消毒については、使用する清拭消毒の製造販売元の指示に従ってください。）
- 13 精製水でプレートとトレーを1分±10秒間で3回濯ぎ、消毒液をすべて除去します。
- 14 圧縮エアでトレーとプレートを乾燥させます。
- 15 トレーにすべてのドリルやインスツルメント、プレートを戻します。

### ▶ 滅菌法

高圧蒸気滅菌してください。

推奨滅菌条件：予備真空がある場合：温度：132～134℃ / 暴露時間：4分間以上

予備真空がない場合：温度：132～134℃ / 暴露時間：20分間以上


院内で指定され、バリデートされた滅菌条件があればそれに従ってください。

### 《ご注意！》

・強アルカリ性洗浄剤のご使用は避けてください。プレートが変色することがございます。（推奨は、pH8.5～11の弱アルカリ性の洗浄剤です。） ・中和剤のご使用を避けてください。

## サイズの目安

お手持ちの洗浄器・滅菌器をご利用いただく際のご参考にしてください。

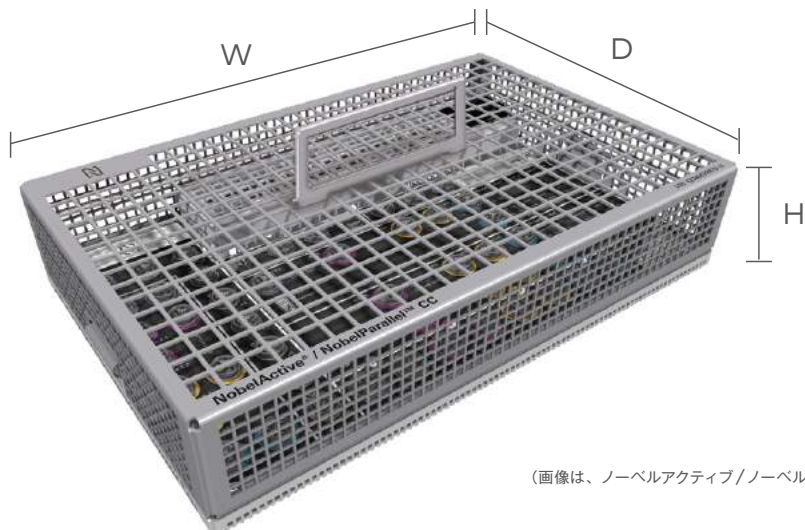

(画像は、ノーベルアクティブ/ノーベルパラレル CC ピュアセット・トレイ)

## 製品名の概要

### ピュアセット・トレイ

- ・インスツルメントやドリルが入っていない空の状態のボックスです。プレートやグローメットが含まれます。
- ・単品でのご購入が可能です。



### プレート

- ・アルミニウム製
- ・ウォッシャー・ディスインフェクター使用時は、トレイから外して、別々に入れます。
- ・超音波洗浄は不可です。
- ・単品でのご購入が可能です。

### グローメット (ドリルやインスツルメント保持部)

- ・PEEK製部分とステンレススチール製部分で構成されています。

### オンラインでご注文

ノーベルバイオケアのオンラインストアから  
インプラントおよび関連製品を幅広いラインナップより  
24時間いつでもご注文いただけます。  
(発送手続きは営業時間内)

[store.nobelbiocare.com/jp](https://store.nobelbiocare.com/jp)

### お電話またはファックスにてご注文

カスタマーサービスにお電話をいただくか、  
またはファックスにてご注文いただけます。

TEL 0120-147-118

FAX 0120-726-118

### 製品保証プログラム

ノーベルバイオケアでは、製品の保証プログラムを  
適用しております。詳細に付きましては、  
弊社までお問い合わせください。



[nobelbiocare.com](https://nobelbiocare.com)

MK355B JP 2306 © Nobel Biocare services AG, 2023. All rights reserved.

ノーベルバイオケア、ノーベルバイオケアのロゴ、および本書で使用されている他のすべての商標は、別途記載されていない限り、  
また文脈から明白である場合を除き、ノーベルバイオケアの商標です。このパンフレット内の製品画像は、必ずしも縮尺どおりではありません。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー13F TEL 03-6408-4182

