


レスキューインスツルメント 製品カタログ

アバットメントスクリュー・リトリバルツール

アバットメントスクリューが破折し、インターナルスレッド部に破折片が残存した場合にもノーベルバイオケアのツールを使用し、安全かつ適切に取り除くことができます。

大半のケースでは、アバットメントスクリュー・リムーバーを使用し、スクリューを簡便に取り除くことが可能です。複雑なケースでは、アバットメントスクリュー・リトリバル・リバーズドリルおよびアバットメントスクリュー・リトリバルツールをご使用いただけます。

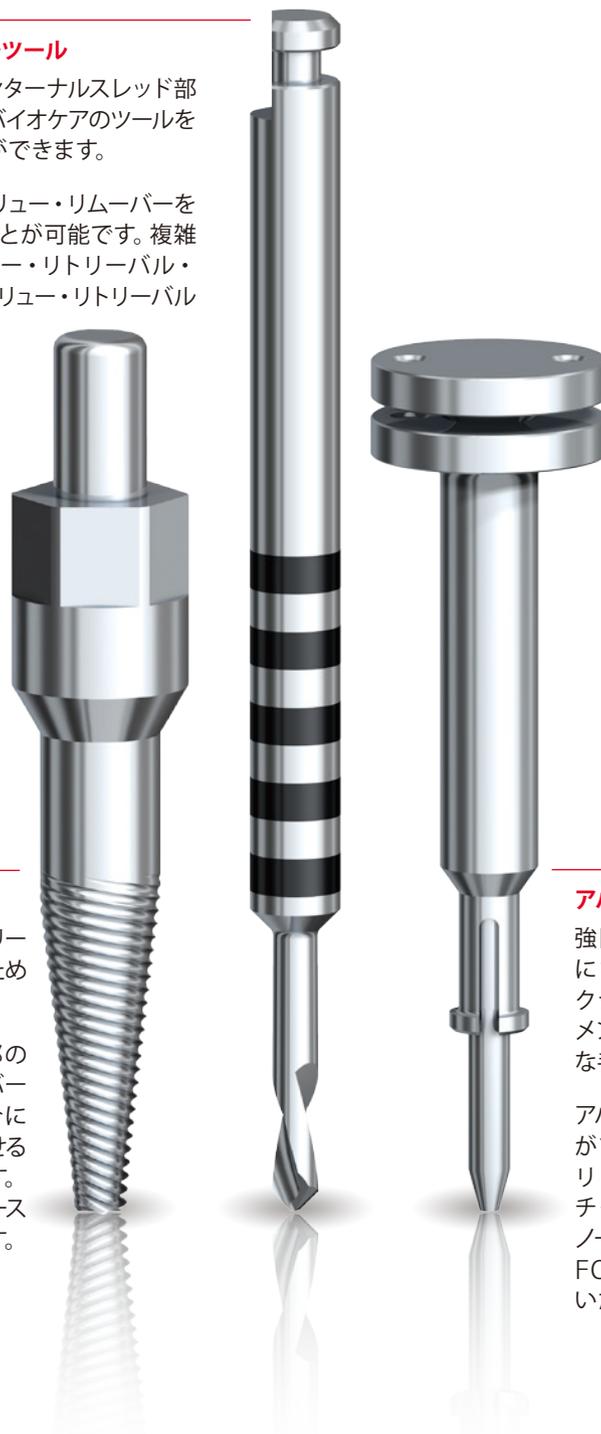

インプラント・リトリバルツール

ノーベルバイオケアのインプラント・リトリバルツールは、インプラントを除去するためにデザインされた専用のツールです。

インプラントの破折やコネクション部の損傷などにより、インプラントドライバーを接続することができなくなった場合にリトリバルツールを使用し、逆回転させることにより、インプラントを除去できます。インプラントが強固に骨と結合したケースでは、トレフィンドリルをお選び頂けます。

アバットメント・リトリバルツール

強固な連結のため、取り外すことが困難になったインターナル・コニカル・コネクションのアバットメントには、アバットメント・リリースピンを使用して、シンプルな手順で取り外しが可能です。

アバットメント・リリースピンで取り外すことができないケースでは、アバットメント・リトリバルツール・ジルコニア用またはチタン用がございます。ジルコニア用はノーベルプロセラ ASCアバットメントおよびFCZアバットメント・クラウンにもご使用いただけます。

外科用コンポーネント

インプラント・リトリバル

インプラント・リトリバルツール

	コニカル・コネクション	トライ-チャンネル	エクスターナル・ヘックス
22mm	37471	NP, RP	NP, RP
31mm	37472	NP, RP	NP, RP
31mm	37473	3.0	
22mm	37474	NP	WP
22mm	37475	RP	WP
22mm	37476	6.0	
22mm	37927	WP	

[滅菌品]



インプラント・レスキュー カラー

	トライ-チャンネル
Ø 3.5mm	37478 NP
Ø 4.3mm	37479 RP

[未滅菌品]



ハンドル

レスキューカラー&ドリルガイド用ハンドル 37480

[未滅菌品]



トレフィンドリル

	コニカル・コネクション	トライ-チャンネル	エクスターナル・ヘックス
Ø 3.2/4.0mm	37477	3.0	
Ø 3.8/4.6mm	37928	NP	NP
Ø 4.4/5.2mm	37929	RP、 PSインプラント	NP RP
Ø 5.2/6.2mm	37930	RP	WP
Ø 5.6/6.6mm	37931	WP、 PSインプラント	RP WP
Ø 6.2/7.0mm	37932	6.0、 PSインプラント	WP WP

[滅菌品]



アバットメントスクリュー・リトリバル

アバットメントスクリュー・リムーバー

	コニカル・コネクション	トライ-チャンネル	エクスターナル・ヘックス
3.0	37505		
NP	37506	37506	37506
RP, WP, 6.0	37507	37507	37507

[滅菌品]



レスキュードリル・ガイド

	コニカル・コネクション	トライ-チャンネル	エクスターナル・ヘックス
3.0	37485		
NP	37486	37488	37482
RP	37487	37489	37483
WP	37933	37490	37484
6.0		37491	

[未滅菌品]



アバットメントスクリュー・リトリバルツール

	コニカル・コネクション	トライ-チャンネル	エクスターナル・ヘックス
3.0, NP	37503	37503	37503
RP, WP, 6.0	37504	37504	37504

[滅菌品]



修復用タップ

	コニカル・コネクション	トライ-チャンネル	エクスターナル・ヘックス
M1.4	37497	3.0	
M1.6	37498	NP	NP
M1.8	37499	NP	
M2	37517	RP, WP	RP, WP, 6.0
M2.5	37500		WP

[滅菌品]



アバットメントスクリュー・リトリバル・リバースドリル

	コニカル・コネクション	トライ-チャンネル	エクスターナル・ヘックス
3.0, NP	37501	37501	37501
RP, WP, 6.0	37502	37502	37502

[滅菌品]



ハンドル マシンインストゥルメント用 29161

[未滅菌品]



アバットメント・リトリバル

アバットメント・リトリバルツール

	コニカル・コネクション
NP	ジルコニア用 37512
RP, WP	ジルコニア用 37882

[未滅菌品]



	コニカル・コネクション
NP	チタン用 36247
RP, WP	チタン用 37881

[未滅菌品]



アバットメント・リリースピン

	コニカル・コネクション
3.0	37509
NP	37510
RP, WP	37511

[未滅菌品]

