



Universal BASE

Take me to the lab

Universal Base

Soluções

CAD/CAM

para a sua produção interna

Escolher componentes que se ajustem e funcionem perfeitamente em conjunto é fundamental para o sucesso. Com o nosso amplo portefólio de componentes originais, pode criar restaurações de qualidade para os seus implantes Nobel Biocare. Todos os produtos são embalados em conjunto com um parafuso original Nobel Biocare, concebido para um forte ajuste e desempenho a longo prazo.

Disponível para todas as indicações e todas as conexões Nobel Biocare.

Utilize o fluxo de trabalho que prefere: digitalização convencional, intraoral ou de secretária.

Uma forma original e económica de restaurar os implantes Nobel Biocare.

Restaure os seus implantes Nobel Biocare com a Universal Base e beneficie de uma garantia abrangente.*

*Para obter detalhes, veja o programa de garantia em nobelbiocare.com/warranty.



Universal Base (Base Universal)

Para restaurações unitárias.

Conexão Cônica interna,
hexagonal externa
e tri-channel interna.

Universal Base Non-Engaging (Base Universal Rotacional)

Para restaurações múltiplas.

Conexões Cônicas internas,
hexagonais externas
e tri-channel internas.

Design Cônico ou reto.



Universal Base Multi-unit Abutment (Base Universal Pilar Multi-unit)

Para restaurações múltiplas
e de arcada completa.

Conexão Pilar Multi-unit.

Design Cônico ou reto.



On1™ Universal Abutment (Pilar On1™ Universal)

Para restaurações unitárias
e múltiplas até 3 unidades.

Conexões On1 Base.

N1™ Universal Abutment and Universal Abutment Base (Pilar N1™ Universal e Base Pilar Universal)

Para restaurações unitárias
e múltiplas.

Conexão Cônica trioval, Base N1.



Universal Base

A base
do seu
fluxo de trabalho
CAD/CAM


Escolha o fluxo de trabalho que prefere

Melhore os seus serviços e faça crescer o seu negócio com a produção interna.

Beneficie da flexibilidade do fluxo de trabalho, com a digitalização intraoral ou de secretária disponível para todas as indicações.

Projete a sua restauração com o seu software DTX Studio™ Lab, 3Shape®, Dentalwings ou exocad™.

Fluxo de trabalho de digitalização intraoral

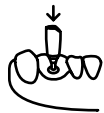

Localizador(es) de posição de encaixe



Realizar digitalização intraoral



Enviar digitalização



Importar dados de digitalização para o software CAD



Projetar restauração

DTX Studio™ Lab:
Produtos automaticamente incluídos no software




3Shape®, dentalwings e exocad™:
Transfira bibliotecas para produção local Nobel Biocare em nobelbiocare.com/local-production



Restauração com trituradora

(e imprimir um modelo, se necessário)

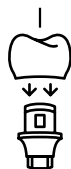

Finalizar restauração e ligar à base



Encaixar e apertar a restauração intraoralmente

Fluxo de trabalho de digitalização de secretária



Fazer uma toma de impressão



Conectar localizador(es) de posição ao modelo



Realizar digitalização de secretária

ENCOMENDAS ONLINE

Encomende toda a nossa gama de implantes e restaurações protéticas pré-fabricadas 24 horas por dia através da loja Nobel Biocare online.

nobelbiocare.com/store

ENCOMENDAS PELO TELEFONE

Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente ou o seu representante comercial.

GARANTIA VITALÍCIA

Em todos os implantes Nobel Biocare, incluindo componentes protéticos pré-fabricados. Para mais informações visite:

nobelbiocare.com/warranty



nobelbiocare.com/local-production



87756 PT 2110 Impresso na UE © Nobel Biocare Services AG, 2021. Todos os direitos reservados. Distribuído por: Nobel Biocare. Limitação de responsabilidade: Nobel Biocare, o logótipo da Nobel Biocare e todas as restantes marcas comerciais são, caso não exista nenhuma declaração adicional ou isso não seja evidente pelo contexto de determinados casos, marcas comerciais da Nobel Biocare. Consulte nobelbiocare.com/trademarks para obter mais informações. As imagens dos produtos não estão necessariamente à escala. Todas as imagens dos produtos são apenas para fins ilustrativos e podem não ser uma representação exata do produto. Alguns produtos poderão não estar aprovados/ter autorização de introdução no mercado por parte da entidade reguladora em todos os mercados. Contacte o representante de vendas local da Nobel Biocare para conhecer a gama atual de produtos e a respetiva disponibilidade. Atenção: as leis federais (EUA) ou as leis vigentes na sua jurisdição podem restringir a venda ou encomenda deste dispositivo a médicos dentistas ou médicos. Consulte nas Instruções de Utilização todas as informações de prescrição, incluindo as indicações, as contraindicações, os avisos e as precauções Universal Base Non-engaging e Universal Base Pilares Multi-Unit são fabricados pela Elos Medtech Pinol A/S, Engvej 33, 3330 Gørløse, Dinamarca e distribuídos pela Nobel Biocare Services AG.